

Nejlepší věci v životě jsou jednoduché.



KaVo. Dental Excellence.

Mnoho inteligentních detailů.
Jednoduchý cíl - pracovat intuitivně.





Co patří k systému v ošetření, který přesvědčí svou jednoduchostí?

Kdo chce optimalizovat stomatologické pracovní postupy, musí udělat nejdříve jednu věc: klást otázky. Jaké předpoklady musí být splněny, abyste mohli pracoviště lékaře obsluhovat zcela intuitivně? Jaké pocity musí vzbuzovat křeslo pro pacienta, aby se k vám pacienti vždy rádi vraceli? Díky čemu se stává nožní spouštěč ergonomicky přesvědčivým pracovním nástrojem? Jak může asistentka pracovat efektivněji a hladce Vás podporovat? Jak vypadá hygienická koncepce, při které Vy i Vaši pracovníci ušetříte denně cenný čas a současně budete všechny zúčastněné optimálně chránit?

Odpovědi na všechny otázky obdržíte na následujících stranách.



*Soustřed'te se plně na svou práci s pacientem.
A Vaše stomatologická souprava Vás při tom
bude obsáhle podporovat.*



KaVo. Dental Excellence.

Kdo provádí hodně ošetření, potřebuje především jedno. Intuitivně ovládané pracoviště lékaře.

Čirá intuice: Všechny funkce vyvolávejte rychle a pohodlně.

Vlastně je to jasné, ale ne samozřejmé: na svém pracovišti lékaře najdete všechny funkce tam, kde je přepokládáte. Tím odpadá dlouhé zapracování, nepříjemné listování v příručce a hledání v průběhu ošetření – díky intuitivnímu ovládacímu rozhraní pomocí tlačítek přímé volby, bez komplikovaného dvojího obsazení.

Se svou prací můžete začít ihned. V pozadí se nový, moderní software postará o to, aby vše fungovalo hladce. Práci ještě více usnadní tlačítka přímé volby u standardních funkcí, jasný design a barevné schéma KaVo. Díky tomu ušetříte při každém ošetření cenný čas.

Díky intuitivní ovládací fólii lze ovládat systém KaVo ESTETICA E50 rychle a jednoduše. Vyjmete jeden nástroj a na první pohled získáte všechny potřebné informace.

S volitelným vybavením zubařskými nástroji zůstanete pružní i v budoucnosti.

Při volbě vybavení zubařskými nástroji máte úplnou volnost a díky systému spojek – univerzálnímu rozhraní – máte vždy k dispozici pružné možnosti. Pokud by se těžiště ošetření, která poskytujete, mělo časem přesunout, změny jsou možné i později. Na budoucnost budete připraveni technologiemi, které jsou integrovány již dnes – například řízením motoru KaVo SMARTdrive. Máte možnost dovybavit svůj systém KaVo ESTETICA E50 funkcemi endochirurgie a VF kauteru nebo například inovacemi jako ultrazvukovým odstraňovačem zubního kamene PiezoLED a nejmodernějším pohonem na trhu – KaVo COMFORTdrive.

Přejete si víc? S modulem MEMOdent vyvoláte uložené parametry jednotlivých nástrojů pro opakující se postupy při ošetření rychle a spolehlivě (možné na 3 úrovních programů až pro 6 ošetřujících lékařů).



Při koupi své soupravy si vyberte stůl lékaře s pěti nebo šesti pozicemi na nástroje a všechny potřebné pozice si nechte nakonfigurovat podle svých přání – nebo si jednoduše později rozšířte vybavení stolu lékaře z pěti na šest pozic.



Ergonomie je, když je to KaVo. Zcela snadno.

Uvolňujeme vám cestu pro Více komfortu.

Své pracoviště lékaře nastavte vždy tam, kde je to pro Vás nejpříjemnější. Díky tomu budete mít vždy vše v dosahu, nezávisle na tom, zda budete pracovat vsedě nebo vestoje, sami nebo s asistencí. To platí jak pro stolní verzi a pojízdnou verzi na vozíku systému KaVo ESTETICA E50, tak i pro závěsnou verzi na otočném ramenu. Pro kterou z těchto ergonomicky dokonale promyšlených verzí se rozhodnete, záleží jen na Vašich osobních zálibách.




Také závěsnou verzi pracoviště lékaře na otočném ramenu lze nastavit tam, kde je to pro Vás nejpříjemnější.

Intuitivní pracoviště lékaře – přednosti a výhody pro Vás:



- Intuitivní, efektivní práce díky logické a jednoduché obsluze
- Řízení pomocí tlačítek přímé volby
- Modulární, konfigurovatelné a rozšiřitelné
- Uvolněné držení těla a vše kdykoliv přímo v dosahu

Optimální dráhy úchopu – pro nejvyšší efektivitu při každém pohybu ruky.

Design ramena systému KaVo ESTETICA E50 je elegantní a současně vysoce funkční. Umožňuje maximální poloměr pohybu a dovoluje ideální dráhy úchopu. Inteligentní odkládací přihrádka na normované tácky, dvojitý normovaný tácek a tácek US-Tray lze na stůl namontovat nalevo nebo napravo. Váš tácek lze vodorovně posouvat. V závěsné verzi s otočným ramenem můžete navíc měnit nastavení v podélném směru, jednoduše a rychle tácek zavěsit na požadovanou stranu. S tímto výběrem a pružností získáte optimální podporu při každém ošetření.

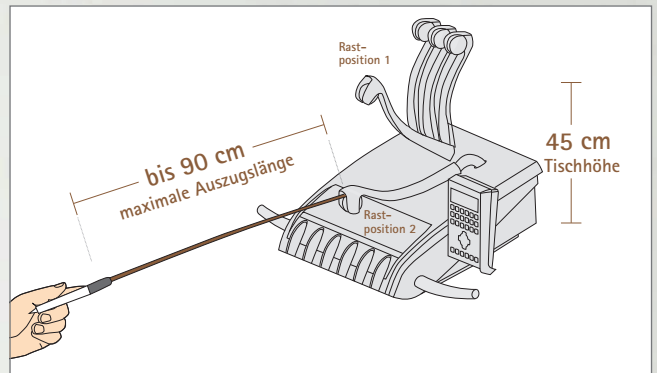

Optimální ergonomie závěsné verze na otočném ramenu díky malé výšce stolu 45 cm a vyváženému ramenu. Velký volný prostor při ošetření je zajištěn maximální délkou vytažení hadic zubářských nástrojů 90 cm.

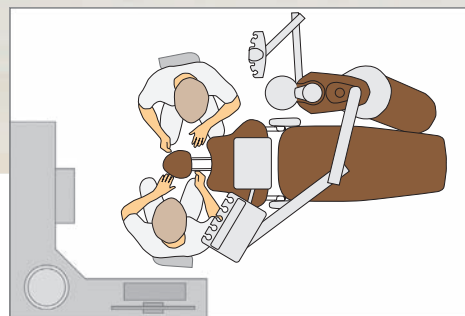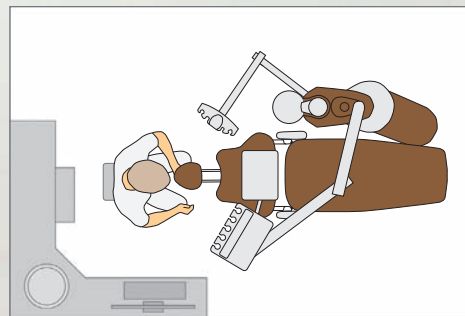

Nezáleží na tom, zda ošetření provedete sami nebo ve spolupráci s asistentkou, polohu pracoviště lékaře ve stolní verzi i v závěsné verzi na otočném rameni a také polohu odkládací přihrádky na tácky i pracoviště asistentky lze nastavit optimálně díky velkému poloměru možných pohybů.



Takto se cítí pacienti dobře: jednoduše se posadit a uvolnit se.

Uložte své pacienty tak, aby jim to plně vyhovovalo.

Budou-li pacienti při ošetření pohodlně uloženi na křesle a budou se cítit dobře, budou se podstatně méně pohybovat. Vaše výhoda: budete moci podstatně efektivněji pracovat a budete se moci plně soustředit na ošetření. Měkké polstrování, ergonomická prohlubeň sedáku a opěrka lordózy zajišťují nejlepší polohu. Navíc můžete ručně například při ošetření dětí zvednout sedadlo ještě výš.

Vaše pracovní pole je tak v nejlepší poloze.

Nastavte polohu svých pacientů a jejich hlavy tak, abyste mohli pracovat co nejlépe – podle indikace a individuálních předpokladů pacientů. Nastavte podle toho jednoduše opěrku hlavy se 2 klouby. Pružný otočný polštář přitom podporuje týl a je vhodný zejména při ošetření dětí.



Díky nadzvednutí sedadla můžete své pacienty nejrůznějších velikostí uložit vždy pohodlně: bez efektu vytažení, stlačování břišního svalstva nebo propadlého kříže.

Jednoduše komfortní: jednoručně ovladatelná opěrka hlavy se 2 klouby s otočným hlavovým polštářem a dokonale pohodlnou opěrkou týlu.

S možnou nejnižší polohou 395 mm a nejvyšší polohou 780 mm můžete křeslo pro pacienty nastavit optimálně pro všechny situace při ošetření.



Budiž světlo: změňte svůj způsob vidění.

Přirozeně, inovativně a komfortně – světlo s 5 hvězdičkami pro Vaši ordinaci.

Dentální světlo, které změní váš pohled na věc: KaVoLUX 540 LED zajišťuje se svítivostí až 40 000 LUX z jedinečného optického systému a čtyř různobarevných světelných diod LED přirozeně bílé světlo nejvyšší kvality. Stejnéměrné světelné pole bez stínů nabízí při ošetření nejvyšší komfort. Vynikající hodnota reprodukce barev Vám navíc umožní přesné sladění barvy zubu a kompozitu pomocí lampy k ošetření přímo u vaší dentální jednotky. Teplotu barev lampy KaVoLUX 540 LED lze individuálně nastavit podle vašich potřeb a inovační režim COMPOSave odfiltruje ze světla veškeré odstíny modré a zpomaluje tak vytvrzování materiálu výplně. S aretovatelným kloubem 3D lze lampu KaVoLUX 540 LED nastavit maximálně pružně a díky bezdotykovému ovládání je tato lampa stejně komfortní jako hygienická.



Jednoduše hygienické: odnímatelné rukojeti a hladké povrchy umožňují rychlou a důkladnou dezinfekci. Bezdotyková obsluha zajišťuje minimální riziko křížové kontaminace a maximální bezpečnost pacientů.

Křeslo pro pacienta a osvětlení – přednosti a výhody pro Vás:

- KaVoLUX 540 LED s přirozeným světlem v nevyšší kvalitě a pohodlným, bezdotykovým ovládáním
- Optimální a pružné usazení všech pacientů
- Pohodlné lehátko díky měkkému polstrování s ergonomickou prohlubní sedáku a integrovanou opěrkou lordózy
- Opěrka hlavy s pružným otočným polštářem pro vysoký komfort při ležení
- Nejvyšší poloha vhodná pro práci ve stoje



Vynikající i ve věci bezpečnosti a hygieny: Uzavřené pouzdro s hladkými povrchy pro rychlou dezinfekci setřením a odnímatelné rukojeti s možností tepelné dezinfekce.



Komplexní pohodlí jde ještě o krok dál: až do špiček nohou.

Ergonomická a hygienická práce bez únavu ztěžklých nohou.

Ovládejte všechny funkce křesla, zubářských nástrojů a multimediální funkce také pomocí nožního spouštěče. Je to úplně jednoduché. Díky ergonomickému pohybu nohy zprava doleva se svaly na nohou nezatěžují trvale, neunavují se a zůstávají uvolněné. Protože díky nožnímu spouštěči nemusíte používat ruce k ovládání funkcí, zmenšuje se podstatně také riziko křížové kontaminace.

S kabelem nebo bez něj: Nastavte polohu nožního spouštěče Premium podle svého přání. S bezdrátovou verzí máte maximální možnou volnost a díky tomu, že kabel chybí, ještě lepší předpoklady k udržení hygieny.

S modulem MEMOdent jsou čas a bezpečnost na Vaší straně.

Funkce modulu MEMOdent umožňuje s vystředěním otočného pedálu nožního spouštěče Premium uložit důležité parametry jako počet otáček, chlazení a intenzitu studeného světla pro každý zubařský nástroj. Jemné klepnutí nohou stačí k rychlému a spolehlivému vyvolání opakujících se postupů při ošetření.

Inovační rádiová technologie KaVo Vám poskytuje veškerou volnost.

Bezdrátový nožní spouštěč Premium pracuje zcela bezporuchově, bezpečně a čistě: vysoce výkonný akumulátor poskytuje energii přibližně na dva měsíce, jeho doba nabíjení trvá jen tři hodiny. Samozřejmě se nemusíte obávat ani samočinného vybíjení, ani paměťového efektu, takže se na svůj nožní spouštěč můžete kdykoliv spolehnout. A nemá žádný kabel, který by se musel čistit.



Pro Vaši asistentku je mnohem jednodušší. Pro Vás je všechno efektivnější.

Tlačítka přímé volby k rychlejšímu zapracování a plynulému ošetřování.

Klíčem k efektivitě vaší asistentky jsou tlačítka přímé volby na ovládací jednotce. Díky nim může jediným stisknutím tlačítka vyvolávat všechny důležité funkce: plnění pohárku na vypláchnutí úst, vyplachování misky, intenzivní dezinfekce, HYDROclean, tlumení světla resp. světlo a časovač. Nejsou tu žádná nadbytečná tlačítka, jen smysluplné funkce.

S tímto pracovištěm dosáhne Vaše asistentka vrcholného výkonu.

Protože rozsah otočení ovládací jednotky je dobře promyšlený, může ho mít neustále v dosahu. Vaše asistentka si může své pracoviště nastavit do polohy zcela podle své potřeby. Volitelné výškové nastavení jí optimálně pomáhá – možné je i ošetření vstoje.

Nožní spouštěč a pracoviště sestry – přednosti a výhody pro Vás:

- Uvolněná a jednoduchá obsluha funkcí křesla, zubářských nástrojů a multimediálních funkcí nohou
- Díky pohybu zprava doleva žádná únava při řízení nohou
- Bezdrátový nožní spouštěč pro ještě více hygieny
- Snadné a přesné řízení počtu otáček pomocí modulu MEMOdent
- Jednoduchá obsluha pracoviště asistentky díky tlačítkům přímé volby
- Maximální pružnost pracoviště asistentky díky nastavení výšky a velkému rozsahu otáčení



*Investice do budoucnosti:
výškové nastavení pracoviště
asistentky zaručuje ergo-
nomické, zdravé držení těla
při práci a zajišťuje hladký
průběh práce asistentky.*

*Díky tlačítkům přímé volby a přehled-
ným funkcím se pracoviště asistentky
mění na pracoviště efektivní.*



Dokonalá hygiena bez kompromisů

Časově nenáročné a jednoduché.

Při pohledu zvenčí čistá záležitost ...

Čištění systému KaVo ESTETICA E50 je nad pomýšlení jednoduché. K dezinfikování lze důležité součásti jako například silikonovou podložku, odkladač na zubařské nástroje, otočné rameno a plivátko snadno sejmout. Veškeré povrchy lze snadno vyčistit a totéž platí i o všech kontaminovaných dílech v dosahu aerosolů. Aby do stomatologické soupravy nemohly proniknout žádné nečistoty, jsou povrchy horní i dolní části krytů zcela uzavřené.

... při pohledu zevnitř dokonalá hygiena.

Systém filtrů odsávání se snadno čistí a ušetří tak zaměstnancům čas při hygienických pracích. Filtr sání lze vyměnit bez problémů a bezpečně.

Pomocí HYDROclean zajistíte svoji funkčnost.

Tento modul brání ucpávání filtrů a poruchám v systému odsávání. Jednoduše ručně spustíte automatický program hydromechanického čištění systémů k odlučování amalgamu, odsávání a vypouštění uvnitř i vně jednotky k ošetření. Čerstvá, čistá voda spolehlivě zředí krev i sekret, aby se nemohly usazovat v odsávacím systému a v odtoku a aby ho nemohly zalepit. Tím ušetříte čas i náklady, které by byly nutné na odstraňování výpadků a které by mohly vzniknout při údržbě odlučovače amalgamu a separačních automatů.

Jednoduché a časově nenáročné: DEKASEPTOL.

KaVo DEKASEPTOL Gel je připraven k okamžitému použití a lze ho používat přímo. Díky tomu ušetříte cenné minuty. DEKASEPTOL kompletně pokryje odsávací hadice a systémy a ulpí na kritických místech namísto toho, aby jen jednoduše protekl při propláchnutí.

Hygiena snadno: všechny povrchy jsou bez štěrbin a díky tomu se snadno čistí.



Bezpečnost má nejvyšší prioritu. Pro všechny.

Chraňte své vybavení před znečištěnou vodou.

Německá plynárenská a vodohospodářská organizace DVGW stanoví ve svých hygienických normách nejvyšší požadavky a KaVo je přejímá. Vodní blok s volným přítokem vody systému KaVo ESTETICA E50 splňuje normu DVGW a brání případné zpětné kontaminaci vodovodního potrubí. Trvalá dezinfekce s přípravkem KaVo OXYGENAL navíc zajišťuje trvalou redukci výskytu řas a choroboplodných zárodků. Doplnkový program intenzivní dezinfekce se silnější koncentrací přípravku OXYGENAL trvá jen přibližně 45 minut. Chrání pacienty před mikroorganismy, které se mohou silněji tvořit v období stagnace, jakým je například víkend nebo dovolená. S intenzivní dezinfekcí můžete hrát na jistotu například také vždy po ošetření rizikových pacientů.

Minimalizujte rizika proplachovacím programem dle RKI.

Splňte požadavky aktuální směrnice RKI. Váš systém KaVo ESTETICA E50 zajišťuje standardizované a automatizované proplachování zubařských nástrojů před započítím práce a po každém pacientovi.

Všechny zúčastněné navíc chrání brzda zpětného sání.

U zubařských nástrojů a motorů KaVo se nachází automatická brzda zpětného sání, která spolehlivě chrání systém přívodu vody. Ta brání nasátí kontaminované vody spreje zpět do stomatologické soupravy. Vy, Váš tým i Vaši pacienti se můžete cítit bezpečně.



Rukojeti, silikonové podložky, plivátka, odkladače na odložení zubařských nástrojů a otočná ramena a lze snadno snímat i dezinfikovat. Filtry odsávání lze díky hygienickým madlům vyměnit jednoduše a bezpečně.

Jednoduchá a bezpečná hygiena – přednosti a výhody pro Vás:

- Automatizovaná a standardizovaná hygiena
- Časově nenáročné a jednoduché čištění díky snímatelným částem přístroje se snadným čištěním
- Nejvyšší standard podle směrnic RKI
- Zvýšená bezpečnost díky brzdě zpětného sání
- Vylepšená hygiena díky uzavřené horní a dolní části krytu



Prostě inteligentní. Když již dnes myslíte na zítřek.

Co patří k systému k dentálním ošetřením, který nabízí nejvyšší míru bezpečnosti do budoucna?

Jak lze zajistit, aby se Váš systém přizpůsobil Vašemu zaměření a zvyklostem při ošetření, pokud se někdy v budoucnosti změní. Co se stane, když přibudou nové metody ošetření? Které technologie musí být integrovány již dnes? Jak Vás mohou podporovat multimediální funkce při Vaší práci? Které pohony budou i v budoucnosti vhodné pro vaše nástroje? Která rozhraní připouštějí další rozšiřování?

Odpovědi na všechny otázky nyní obdržíte na následujících stranách.





Při výběru své zubní soupravy byste neměli zapomínat na budoucnost. Proto je Vaše rozhodnutí pro systém KaVo ESTETICA E50 správné.




KaVo. Dental Excellence.

Myslete otevřeně na novinky. Budoucnost již máte ve svých rukou.


Bezpečnost do budoucnosti díky exkluzivním přednostem KaVo.

Víte již dnes na jaké způsoby ošetření se budete soustředit zítra? Nemusíte je stanovit nyní. Protože jen u systémů KaVo máte možnost rozšířit u svého pracovního stolku na str. lékaře počet pozic pro instrumenty z pěti na šest. Při výběru zubařských nástrojů máte úplnou volnost.

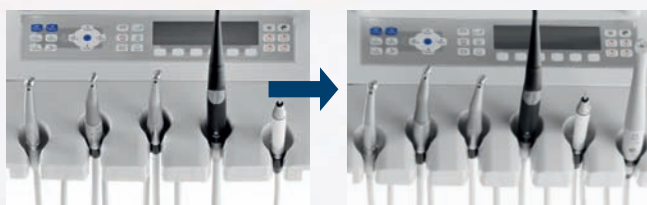

SMARTdrive Vás se silou i šetrně dovede do budoucnosti.

Přesná, efektivní a časově nenáročná práce - to nabízí nové řízení motoru SMARTdrive s plnou silou protažení a při náběhu s chováním mimořádně bez vibrací již v nízkém počtu otáček od 100 ot/min. Díky širšímu rozsahu otáček lze nyní všechny násadce a kolínka použít podstatně variabilněji, což rozšiřuje oblast použití na každé kolínko.

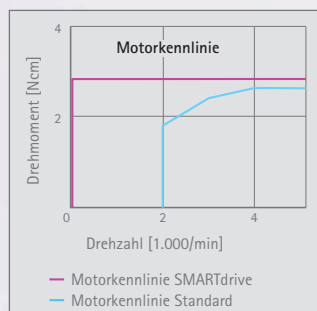

Využijte velké protahovací síly a náběhu bez vibrací motoru KaVo SMARTdrive s rozšířeným rozsahem počtu otáček 100 – 40 000 ot/min.

KaVo INTRA LUX KL 703 LED – lehká váha pro rovnováhu.

S novým bezuhlíkovým mikromotorem nevyžadujícím údržbu KaVo INTRA LUX KL 703 LED zažijete maximální výkon v ryzí podobě. Je optimalizovaný na SMARTdrive a nabízí široké spektrum otáček 100 až 40 000 min⁻¹ s jednoduchým převodem. Díky hmotnosti snížené o 30 % a konstrukci zmenšené o 25 % dokonale sedí v dlani a zajišťuje optimální rovnováhu při dokonalém rozložení váhy. Nabízí více než dostatečný výkon v každé situaci při ošetření a zajišťuje citelně přesnější možnosti ošetření při současně neunavující práci. Pro jednoduchou hygienu lze INTRA LUX KL 703 LED sterilizovat a pro dokonalý přehled má navíc osvětlení 25 000 LUX LED s dlouhou životností. Vynikající hodnoty výkonu pro vynikající výsledky ošetření.



KaVo INTRA LUX KL 703 LED: ještě menší, ještě lehčí přístroj s vzorným rozložením váhy.

Pomocí PiezoLED ošetřujte své pacienty efektivně a s malými nároky na čas.

S novým přístrojem PiezoLED-Scaler vám představujeme pro vaše pacienty vysoce přesné a efektivní čištění zubů. Technologie KaVo CARE umožňuje jedinečný, harmonický výkon a optimální lineární pohyb se zubařskými nástroji pomocí sinusového signálu. Díky přesné práci i ve zvlášť malých oblastech zůstávají zuby a dásně nedotčené. Kruhová emise světla zdrojů LED nabízí optimální přehled a souhra světla s ergonomickým designem umožňuje lékaři pečovat o své pacienty vždy za optimálních podmínek.

PiezoLED: inovační technologie KaVo Care s inteligentní kontrolou zpětné vazby pro nejvyšší standard v ošetřování pacientů.



COMFORTdrive kombinuje sílu, rychlost a lehkost.

S pohonem COMFORTdrive vstoupila společnost KaVo do nové éry zubařských nástrojů. Tento pohon spojuje přednosti turbíny a rychloběžného motoru v jediném samostatném řešení. S otáčkami až 200 000 ot/min bez převodů je vhodný pro všechny přípravy. COMFORTdrive přitom sedí v dlani mimořádně lehce. Hmotnost nižší o 40 % znamená, že pracujete podstatně uvolněněji. Těžiště vašeho zubařského nástroje je dokonale vyvážené. Vaše ruka a prsty jsou podstatně méně zatěžovány, takže můžete pracovat podstatně přesněji.

Individuální osazení – přednosti a výhody pro Vás:

- Integrovaný pohon SMARTdrive pro přesnou práci v nízkém rozsahu otáček
- Vylepšený mikromotor INTRA LUX KL703 LED se širokým spektrem výkonů od 100 do 40 000 min⁻¹
- PiezoLED k efektivnímu a časově úspornému ošetření pacientů
- Nejnovější technika zubařských nástrojů s jednotkou COMFORTdrive pro ještě uvolněnější a efektivnější preparování
- Standardizovaná rozhraní, která představují jistotu do budoucna pro bezproblémové napojování externích přístrojů
- Široký výběr inteligentního doplňkového vybavení, které lze dovybavit i později

Zůstaňte otevřeni budoucnosti díky uznávanému standardu rozhraní USB.



Prostřednictvím rozhraní USB připojujete ke svému systému KaVo ESTETICA E50 zcela jednoduše další vybrané přístroje. Je to mimořádně snadné, protože u USB rozhraní většinou není třeba provádět žádná další nastavení. Váš systém k ošetření sám rozpozná, co jste připojili.



KaVo COMFORTdrive je výkonná lehká váha s mimořádně příjemným zvukem za chodu.



Dívejte se vstříc budoucnosti s klidem. Jste na ni nejlépe připraveni.

Investice do Vaší osobní budoucnosti.

Systém KaVo ESTETICA E50 uspořádán tak, že zajišťuje ergonomicky optimální podporu a efektivní průběhy pracovních činností. Se svými osvědčenými a neustále dále vyvíjenými komponentami (například s kompletně novou elektronikou) disponuje mimořádně vysokou inovační silou, funkčností a formální kvalitou. Tím jste nejlépe vybaveni i do budoucna.

Vsad'te na klasickou modernu.

Tento systém k ošetření se má Vám, Vaší asistentce i Vašemu pacientovi líbit ještě i po letech a kdykoliv má uspokojit maximální vizuální nároky. Proto již dnes vsad'te s moderním designem a atraktivními barvami na trendy do budoucnosti.

Servisní funkce Vám nyní i později ušetří čas i peníze.

Pomocí integrovaného modulu KaVo MEDIAGateway lze rychle, účinně a levně provádět aktualizace softwaru, servisní kontroly i budoucí rozšiřování.



Jednoduše přehled o všem. Váš vstup do digitálního dentálního světa.

Získejte pomocí přístroje ERGOcom light rychlost i komfort.

Spojte zcela jednoduše své systémy: počítač v ordinaci, zubní soupravu a další zdroje médií. Tak dostanete mimo jiné poslední nálezy svého současného pacienta přímo na 17" displej systému KaVo ESTETICA E50 – a k němu náleží cí rentgenové snímky, snímky z mikroskopu a kamery nebo obrázky z PC. Ihned a aniž byste museli Vy nebo asistentka opouštět místnost. ERGOcom light je pro Vás prostě optimálním řešením.

Váš multimediální systém je již připraven k použití.

Abyste mohli používat přístroj ERGOcom light, nepotřebujete ani připojení k PC, ani nemusíte pokládat žádné kabely. Funkce můžete ovládat pomocí nožního spouštěče, ale také přes pracoviště lékaře systému KaVo ESTETICA E50.

Více světla a ostrosti pro dokonalé intraorální obrázky.

Více vidět, více rozeznat – k tomu Vám pomůže nová intraorální kamera ERGOcam 5. Vysvětlíte svému pacientovi ošetření na základě působivých obrázků nebo použijte kameru ke zdokumentování svých úspěchů při ošetření. Ovládání pomocí posuvných regulátorů a definované polohy ohnisek je nad pomyšlení snadné. Velká hloubka ostrosti a vynikající zobrazování barev díky nejmodernější technologii čipů CMOS zejména u obrázků s bohatými detaily i v gingivální oblasti je prostě působivá.

ERGOcom light Multimedia – přednosti a výhody pro Vás:

- Obrázky z kamery lze zobrazit i bez PC
- Zobrazení čtyř obrazů z kamery současně
- Obrazy z PC, mikroskopu a rentgenové snímky na monitoru stomatologické soupravy
- Hygienické ovládání pomocí nožního spouštěče

Intraorální kamera ERGOcam 5 dokonale ergonomicky padne do dlaně a její světlo 40 000 LUX zajišťuje působivé výsledky zobrazení.



Marketing v ordinaci zcela samostatně. Překleňte doby čekání a informujte své pacienty o nabídce Vaší ordinace.



Jednoduché rozhodnutí:
nejvyšší kvalita pro nejvyšší nároky.



Co patří k systému k ošetření, na který se můžete stoprocentně spolehnout?

Která měřítko kvality musí výrobce použít, abyste byli zcela spokojeni? Které jsou nutné vlastnosti, které zaručují, že přijmete správné rozhodnutí ohledně stomatologické soupravy? Je možné, že přes všechny hygienické předpisy splníte přísné předpisy vztahující se k životnímu prostředí? A jaký design dá vašim pacientům pocit, že se zde mohou vždy cítit bezpečně?

Odpovědi na všechny otázky nyní obdržíte na následujících stranách.

Hladká práce bez výpadků, den za dnem, i po mnoha letech jako na novém přístroji: tím jsou známy všechny zubní soupravy KaVo.




Prostě dokonale vyrobené. Kvalita KaVo jde ještě o krok dál.



KaVo znamená osvědčenou a vynikající kvalitu.

Naše nároky na veškeré výrobky KaVo jsou extrémně vysoké. Protože jediné tak můžeme splnit stejně vysoká očekávání našich zákazníků. Aby se nám to podařilo, musí být všechny naše výrobky neustále dokonale precizní a postaveny na solidní úrovni. Osvědčené, kvalitní materiály a komponenty, které své přednosti již prokázaly v praxi, navíc zaručují spolehlivost systému KaVo ESTETICA E50. Každou stomatologickou soupravu navíc přezkujeme jednotlivě a provádíme rozsáhlé stoprocentní testování. Díky tomu sázíte svým rozhodnutím pro systém KaVo ESTETICA E50 vždy na jistotu.

Nadčasový design, v praxi osvědčené komponenty a nejmodernější funkce zajišťují vynikající spolehlivost systému KaVo ESTETICA E50.

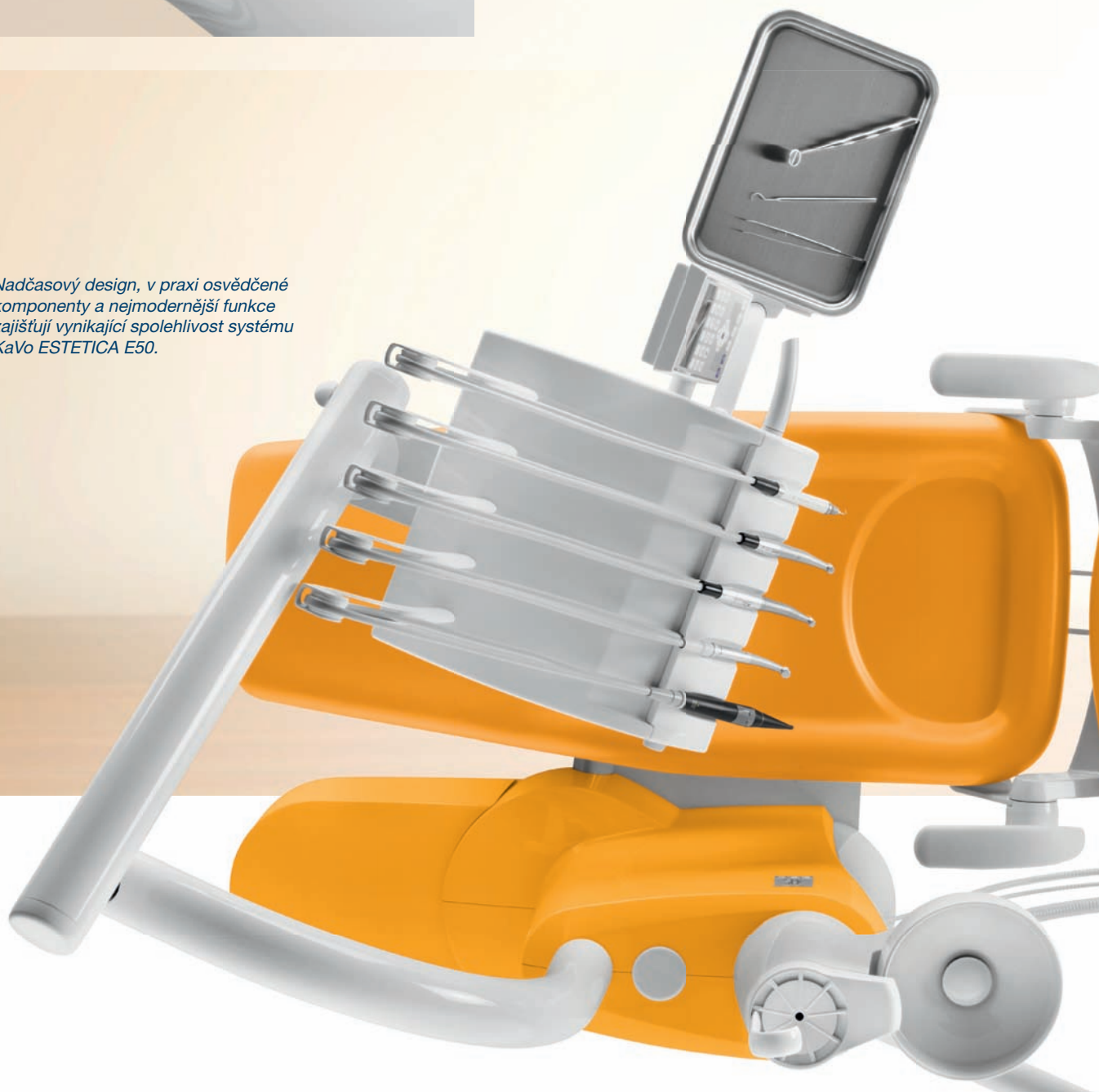

Celková koncepce systému KaVo ESTETICA E50 se Vám sama vyplatí.

V tomto systému k ošetření se uplatnily dlouholeté zkušenosti společnosti KaVo a vysoce kvalitní komponenty, které se již tisíckrát osvědčily. Naše heslo zní důvěřovat osvědčenému a to dobré neustále zlepšovat. Jen tak dokáže systém KaVo ESTETICA E50 vyhovět i budoucím požadavkům. Zcela bezpečná investice pro vás.

Kvalita KaVo – přednosti a výhody pro Vás:

- Solidní konstrukce s vysoce kvalitními materiály
- Přesné zpracování podle nejvyšších norem kvality
- Nejvyšší bezpečnost funkcí díky rozsáhlým dlouhodobým testům
- Optimální poměr ceny a výkonu

Příklad DEKASEPTOL Gel: je ekologicky nezávadný a podle směrnic OECD biologicky odbouratelný. Neobsahuje aldehyd, fenol ani chlor a není nebezpečnou látkou.



Chraňte své prostředí již ve své ordinaci.

Pokud někdo hovoří o ochraně životního prostředí, měl by myslet na to, že tato ochrana začíná již v jeho vlastním okolí a že před škodlivými vlivy musí být chráněni i lidé. Proto je nasnadě sledovat podrobněji materiály a přípravky, se kterými se vaši zaměstnanci setkávají denně. KaVo zaručuje, že i zde budou zaměstnanci optimálně chráněni. Naše výrobky se vyrábějí v Německu a splňují nejpřísnější německé předpisy na ochranu životního prostředí. K tomu přispívá také nadprůměrně dlouhá životnost a likvidace elektronických dílů v souladu se směrnicí RoHS, díky níž nedochází k uvolňování nebezpečných látek ani později.



Na to se můžete spolehnout: kontrovaná kvalita podle celosvětově nejnáročnějších norem.



KaVo. Dental Excellence.

Máte možnost volby: Barva a doplňkové vybavení pro vaši ordinaci.

Barvy, které určují trend.

Nezáleží na tom, jak si zařídíte svou ordinaci, systém KaVo ESTETICA E50 existuje v barvě, která s ní ladí. Zkombinujte svou barvu polstrovaní a laku přístrojů podle svých individuálních nároků a zušlechťete svou stomatologickou soupravu výběrem nových provedení Chrom Edition v čokoládově hnědé nebo noční modři.

Barvy laků



Metallic Blue
(modrá
metalíza)



Metallic Crim-
son (purpurová
metalíza)



Metallic Rose
(růžová
metalíza)



Metallic Cham-
pagne (metalíza
šampaň)



Metallic Silver
(stříbrná
metalíza)



Metallic Silver
Blue
(modrostříbrná
metalíza)



Aple Green
(jablkově
zelená)



Orange
(oranžová)



dentální bílá
(standardní)

NOVINKA! Trendové barvy KaVo



Chrom Edition
čokoládově
hnědá



Chrom Edition
noční modř



Metallic Choco
Brown (čoko-
ládově hnědá
metalíza)



Metallic Night
Blue (metalíza
noční modř)



Berry Metallic
(ostružinová
metalíza)



Reed Green
(rákosová
zelená)

Barvy polstrů



Black (černá)



Antracite
(antracitová)



Night Blue
(noční modř)



Royal Blue
(královská
modř)



Crimson
(purpurová)



Orange
(oranžová)



Mint (mátová)



horizont



Pearl Grey
(perlově šedá)

NOVINKA! Trendové barvy KaVo



čokoládově
hnědá



Berry
(ostružinová)



Reed Green
(rákosová
zelená)

S elegantním provedením Chrom Edition jsou kromě zušlechtění chromovaným okrajem nalakovány novou trendovou barvou také dolní části křesel pacienta i lékaře.



Využijte možnosti: Uspořádejte si svou zubní soupravu individuálně.

	TM	S		TM	S
Křeslo pro pacienty			Pracoviště asistentky		
Standard	●	●	s ovládacím prvkem Comfort	●	●
Zvedací sedák	●	●	Odsávání aerosolu ze spreje	●	●
Měkké polstrování	●	●	Savka k odsávání slin	●	●
Opěradlo			2. Savka k odsávání slin	○	○
Progress	●	●	Třífunkční stříkačka	○	○
Opěrka hlavy			Víceúčelová stříkačka	○	○
2 klouby s tlačítkem	●	●	Ruční násadec na polymerizaci světlem LED	○	○
Nástavec s magnetickým klínem			Držák pro upevnění podnosu	○	○
(pro 2 klouby s tlačítkem)	○	○	Držák pro upevnění modulu DIAGNOdent	○	○
Loketní opěrka			Otočné pracoviště asistentky	●	●
Vpravo	●	●	Otočné a výškově nastavitelné	○	○
Vlevo	●	●	Pracoviště asistentky		
Pracoviště lékaře			Vedení hadice odsávání	○	○
1. Turbínková hadice	●	●	Selektivní odkladač	○	○
1. Motor LUX KL 701	x	x	Těleso přístroje		
1. Motor LUX KL 703	x	x	Porcelánové plivátko	x	x
Třífunkční stříkačka	●	●	Skleněné plivátko	x	x
Víceúčelová stříkačka	○	○	VACUstopp	●	●
2. Turbínková hadice	○	○	Trvalá dezinfekce ²	●	●
2. Motor LUX KL 701	○	○	Intenzivní dezinfekce	○	○
2. Motor LUX KL 703	○	○	HYDROclean (proplachovací systém)	●	●
SMARTdrive	●	●	Boiler na teplou vodu	○	○
Integrované řízení točivého momentu (Endo)	○	○	MEDIAgateway	●	●
COMFORTdrive	○	○	Systém napájení		
Odstraňovač zubního kamene PiezoLED	○	○	Vodní blok DVGW	x	x
Multifunkční displej Memodent	●	●	Vodní blok Kompakt	x	x
Malý prohlížeč rentgenových snímků	○	○	Vodní láhev DVGW	x	x
Panoramatický prohlížeč rentgenových snímků ¹	○	○	Regulátor podtlaku	○	○
(na konstrukční tyči svítidla)			Připojení přídatných přístrojů	○	○
Držák na standardní tácek US-Tray	x	x	Systém odpadu		
Držák na 1 normovaný tácek	x	x	Externí odsávání	x	x
Držák na 2 normované tácky	●	●	Odlučovač amalgamu DÜRR	x	x
Ohřev vody pro sprej zubařských nástrojů	○	○	Odlučovací automatika DÜRR	x	x
Fyziologický roztok kuchyňské soli	○	○	Lapač pevných částic	x	x
Brzda zpětného sání pro zubařské nástroje	●	●	Ostatní		
VF kauter	○	–	Rádiový nožní spouštěč Premium	○	○
USB rozhraní	○	○	Dentální světlo KaVoLUX 540 LED	○	○
ERGOcam 5	○	○	Montážní tyč na osvětlení	○	○
			Servisní box pro pacienta	○	○
			ERGocom light	○	○
			Základní souprava DEKASEPTOL	●	●
			Hygienický balíček	○	○

● Sériové vybavení (může se lišit podle variant jednotlivých zemí) ○ Volitelné vybavení x Nutno vybrat – Nelze dodat

1 Ne ve spojení s multimédií

2 Jen s vodním blokem DVGW a vodní lahví DVGW



KaVo. Dental Excellence.



KaVo. Dental Excellence.

KaVo CZ s.r.o., Tůrkova 2319/5b, 149 00 Praha
tel.: +420 272 654 566, fax: +420 272 654 732, www.kavo.cz