

INTERAKCE

1/2016
LABORATOŘ



INTERDENT®

100 00 Praha 10, Foerstrova 12 • tel./fax: 274 783 114, 274 814 404, 274 820 130 • interdent@interdent.cz • www.interdent.cz

Identica


SPOLEHLIVÉ, PŘESNÉ A RYCHLÉ **SKENERY** PROVOZOVANÉ
BEZ LICENČNÍCH POPLATKŮ A UMOŽŇUJÍCÍ EXPORTOVAT SOUBORY
V OTEVŘENÉM FORMÁTU STL

Identica Blue

Identica Blue s SW Exocad

479.900 Kč

- Modré světlo
- Přesnost 10 μm
- Skenování artikulátoru
- Skenování otisků
- Ergonomický design

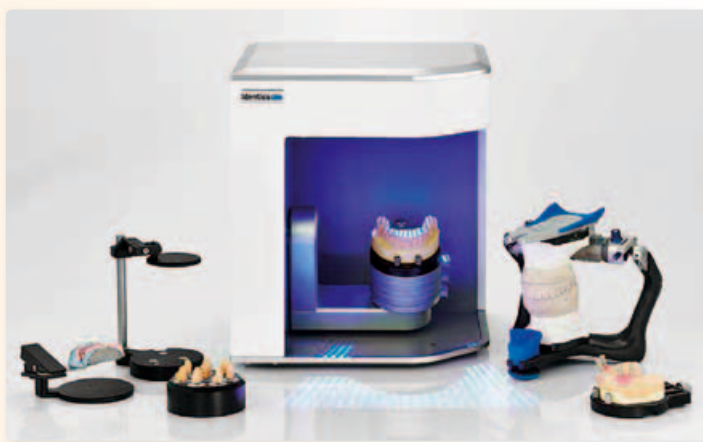

Identica Hybrid

NOVÝ MODEL S VYLEPŠENÝMI VLASTNOSTMI



- Skenování za 16 sekund
- Radikálně zvýšená komprimace dat (až o 84 %)
- Tři kamery (skenování v barvě)
- Flexibilní Multi-die (skenování více objektů najednou)
- Přesnost 7 μm
- Tříosé rameno (umožňuje skenovat komplikované objekty)
- Skenování oboustranného otisku



Identica Hybrid s SW Exocad

549.900 Kč

FUJIROCK ZLATOHNĚDÝ

Velmi tvrdá přírodní sádra. Ideální pro všechny druhy protetiky díky vysoké přesnosti, výjimečné okrajové pevnosti a odolnosti vůči tlaku.

Fujirock 5 kg
zlatohnědý **999 Kč**

Fujirock 12 kg
zlatohnědý **1.999 Kč**



INTERROCK NEW

Extra tvrdá tixotropní sádra s vylepšenými vlastnostmi. Je určena pro velmi přesné práce, zejména korunky a můstky. Dodává se v barvách zlatohnědá nebo slonová kost. Tvrdost 250 N/mm² po 24 hodinách.



VIDEO

Interrock New
4 kg sáček **399 Kč**

Interrock New
5 kg vědro **679 Kč**

Interrock New
20 kg vědro **2.149 Kč**

Interrock New
25 kg pytel **2.199 Kč**

INTERDUR

Kvalitní tvrdá sádra III. třídy (tvrdost 120 N/mm² po 24 hod.) ke zhotovení pracovních modelů, na skeletové náhrady a protiskusy.

Interdur 25 kg
pytel **1.129 Kč**

Interdur 5 kg
vědro **379 Kč**

Interdur 20 kg
vědro **1.099 Kč**



DVOJITÉ ČEPY

Tyto čepy zajišťují dobrou fixaci děleného pracovního modelu, zejména v těch částech modelu, kde je méně místa. Pouzdra zvyšují stabilitu čepu i po víceném snímání. Gumová zátko zabraňuje vniknutí sádry při zhotovení podstavce modelu. Dodávají se ve dvou délkách: 13 a 15 mm.



VIDEO

Dvojitě čepy sada
13 nebo 15 mm **479 Kč**

(100 ks dvojitých čepů, 100 ks pouzder,
100 ks gumových zátek)

Fréza Ø 1,82 mm **279 Kč**

GIROFORM

Inovovaný systém na výrobu modelu, který díky redukci expanze sádry zpřesňuje práci. Model má dokonalý vzhled, jeho zhotovení je rychlé a velmi hospodárné.

Giroform destičky Classic L
100 ks bílé nebo modré **1.859 Kč**

Giroform destičky
Premium+ L 100 ks **2.299 Kč**

Giroform čepy
1000 ks **789 Kč**



Giroform **53.890 Kč**

+ Giroform
Starter Kit **ZDARMA**



(Cenu přístroje nelze kombinovat s dalšími slevami)

FORMY NA SÁDROVÉ MODELY

Formy pro odlití přesné báze modelů.
Dodávají se pro horní nebo dolní čelist.



Forma
horní / dolní **149 Kč**



Tessex 12 ks horní
nebo dolní desky **169 Kč**



Tessex AI 12 ks horní
nebo dolní desky **169 Kč**

TESSEX / TESSEX AL

Tessex – šelakové bazální desky v růžové barvě.
Tessex AI – šedé šelakové bazální desky
s příměsí hliníku.

GELODOUBLE

Agarová dublovací hmota tyrkysové barvy. Používá se k dublování modelů a pro výrobu celkových náhrad z líčí pryskyřice.

Gelodouble 2,5 kg **599 Kč**

Gelodouble 6 kg **1.299 Kč**



Dublovací kyveta **889 Kč**

DUBLOVACÍ KYVETA

Čtyřdílná dublovací kyveta z odolného plastu. Výškově nastavitelná kónická patrová vložka šetří spotřebu dublovacího materiálu. Rozměry: šířka 8,8 cm × hloubka 7,3 cm × výška 4,0–4,8 cm.

DUROFLUID

Pomocí Durofluidu se vytvrzují modely ze zatmelovací hmoty. Zajišťuje lepší adhezi voskové modelace. Roztok se aplikuje na model nastříkáním.



Durofluid 100 ml
s rozprašovačem **689 Kč**



GUMQUICK

Adiční silikonové hmoty pro zhotovení gingivální masky. Gumquick odpovídá odstínu gingívy a má zanedbatelnou kontrakci. Dodává se v kartuších. GUMQUICK má vynikající reprodukci detailů. Konečná tvrdost materiálu je 60 Shore A. GUMQUICK SCAN obsahuje speciální přísadu pro skenování ve všech dostupných skenerech. Konečná tvrdost materiálu je 65 Shore A. GUMQUICK IMPLANT má sníženou flexibilitu pro zhotovení přesného modelu na implantáty. Povrch zpolymerovaného materiálu je odolný vůči abrazi. Konečná tvrdost materiálu je 75 Shore A.

GumQuick
sada **1.299 Kč**

(2×50 ml, 12 mísících kanyl, 10 ml DuoSep)

GumQuick Scan
sada **1.599 Kč**

(2×50 ml, 12 mísících kanyl, 10 ml DuoSep)

GumQuick Implant
sada **1.799 Kč**

(2×50 ml, 12 mísících kanyl, 10 ml DuoSep)

CERADENT

Plotýnkový vosk pro registraci skusu, tvárný již při mírně zvýšené teplotě.



Ceradent 1000g **489 Kč**

FAZETOVÉ PRVKY



Sada obsahuje 28 tvarů ve třech velikostech (A, B, C). Dodává se ve dvou částech – 1. až 4. zub (I) a 4. až 7. zub (II). Obě balení obsahují 18 tvarů ve třech velikostech (4. zub je v obou baleních) po 5 kusech od každého. Doplňkové balení jednoho typu je po 20 kusech. Fazety se standardně dodávají z červeného měkkého vosku, na objednávku i ze zeleného středně tvrdého vosku.

Fazetové prvky jednotlivé tvary 20 ks **199 Kč**

Fazetové prvky sada I nebo II **2.299 Kč**

STABILOPLAST

Víceúčelová pryskyřice určená zejména pro fixaci, stabilizaci, spojování a vykrývání. Může být aplikována přímo z lahvičky. Akcelerátorem ve spreji ji lze rychle vytvrdit. Má vynikající adhezivní schopnosti a je rozměrově stálá. Při polymeraci se nezahřívá.

Stabiloplast sada **1.199 Kč**

(2 x 10g pryskyřice, 30 ml akcelerátor, špachtle)



Termotop New sada **6.599 Kč**

Termotop New **5.399 Kč**



TERMOTOP NEW

Přístroj nové konstrukce pro zhotovení kapničky namáčecí metodou s možností plynulého nastavení teploty. Sada obsahuje Termotop New, Interfilm s rozprašovačem, stříbrný distanční lak a vosk do kapničkovače.

VOSK PRO KAPNIČKOVÁČE

Vosk ke zhotovení kapničky ponornou metodou. Světle červený vosk s vynikající pevností a tvarovou pamětí se dodává ve formě pečítek.

Vosk pro kapničkovače 200g **469 Kč**

Vosk pro kapničkovače 50g **259 Kč**



Smartwax Duo **6.899 Kč**

Smartwax Duo násadka **1.999 Kč**

SMARTWAX DUO

Elektrický modelovací nůž, k němuž lze připojit dvě násadky. Pro každou z koncovek je možné individuálně naprogramovat tři rozdílné teploty v rozsahu 50–220°C. K dispozici je šest typů koncovek včetně korkového držátka, s nožem se dodává jedna násadka se základní koncovkou, samostatná násadka je bez koncovky.

INTERAKCE

I-BOND NF / I-BOND 02

I-Bond NF – slitina k napalování keramiky na bázi Cr-Co, neobsahuje nikl, berylium ani galium.
I-Bond 02 – cenově výhodná chromniklová slitina k napalování keramiky bez obsahu berylia.



I-Bond 02 1000g

+



Korunkový vosk
slonová kost 30g

+



Intervest K+B speed
6,5 kg (41 × 160 g)

I-Bond 02
balíček

5.999 Kč



I-Bond NF 1000g

+



Univerzální vosk
šedý 30g

+



Interfine K+B speed
6,5 kg (41 × 160 g)

I-Bond NF
balíček

7.999 Kč

I-MG / I-MG HE

Slitiny určené ke zhotovení skeletů vyznačující se velkou odolností proti korozi.



I-MG 1000g

+



Plotýnkový vosk
300g

+



Modelcast
12 kg (30×400 g)

I-MG
balíček

5.699 Kč



I-MG HE 1000g

+



Interduplicast
1+1

+



Modelcast S
12 kg (30×400 g)

I-MG HE
balíček

7.399 Kč

WIRON 99

Nejpoužívanější slitina pro napalování keramiky a pro fazetování pryskyřičnými materiály, neobsahuje berylium.



Wiron 99
1000g

10.399 Kč

Wiron 99
250g

2.799 Kč

WIROBOND C / WIROBOND 280

Chromkobaltové slitiny bez příměsi niklu a berylia pro napalování keramických hmot a pro fazetování pryskyřičnými materiály.



Wirobond C/280
250g

2.899 Kč

Wirobond C/280
1000g

10.799 Kč

INTERPRESS K+B SPEED

Zatmelovací hmota pro zhotovení celokeramických prací presovací technikou. Velmi jemná struktura umožňuje zcela hladký povrch výlisku. Pevnost materiálu i při vysokých teplotách dává technikovi jistotu dokonalého výsledku práce. Presovací forma z tohoto materiálu se vyhřívá na teplotu doporučenou výrobcem keramických pelet. Je tedy vhodná pro různé presovací systémy. Mísí se s tekutinou Expasol.

Interpress K+B speed
5 kg (50 × 100 g)

1.999 Kč

NOVINKA



MOLDAVEST EXACT

Fosfátová bezgrafitová zatmelovací hmota na fixní náhrady s vysokou přesností odlitku. Je doporučena pro konvenční i rychlé vyhřívání. Mísí se s tekutinou BS liquid 1.

Moldavest Exact
5,6 kg (35 × 160 g)

1.599 Kč

BS liquid 1
0,9l

389 Kč

BELLAVEST SH

Pevná zatmelovací hmota s možností konvenčního i rychlého vyhřívání, vhodná i pro odlévání bez kovového licího kroužku. Mísí se s tekutinou BegoSol HE.

Bellavest SH 12,8 kg
(80 × 160 g)

2.599 Kč



Wirofine 18 kg
(45 × 400 g)

2.599 Kč



WIROFINE

Velmi jemná zatmelovací hmota na skelety určená pro klasické i rychlé vypalování. Mísí se s tekutinou BegoSol K.

MANŽETY S PODLOŽKOU

Silikonové manžety se používají pro bezkroužkovou metodu odlévání. Díky kónickému tvaru manžety lze kroužek snadno vyjmout.

Manžeta
s podložkou 1X

389 Kč

Manžeta
s podložkou 3X

429 Kč

Manžeta
s podložkou 6X

539 Kč

Manžeta
s podložkou 9X

599 Kč



Smartmix X2

33.890 Kč

(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)



SMARTMIX X2

Vakuová míchačka se speciálním tvarem míchadla, které zajišťuje naprosto homogenní horizontální i vertikální promíchání materiálu. Všechny parametry míchání – čas, rychlost, smysl otáček, interval, předmíchání, prevakuum, postvakuum a název programu – lze zadat velmi jednoduše. Přístroj je možné zavěsit na stěnu nebo postavit na stůl za použití stojanu, který se dodává jako zvláštní příslušenství. S míchačkou se dodává nádoba o objemu 500 ml.

INTERAKCE

VACUMAT 6000

Poslední generace keramických pecí Vacumat 6000M v lakovaném (na přání v nerezovém) provedení pro pálení všech dentálních fazetovacích keramik. Vacumat 6000 MP umožňuje zhotovení keramických náhrad presováním i napalování fazetovacích keramických hmot. Modulární systém dává možnost výběru ze dvou typů dotykových ovládaní (vPad comfort – pro dvě pece, vPad excellence – až pro čtyři pece) s různým stupněm funkčního vybavení. Nově jsou obě tato ovládaní podsvícena LED světlem a mají intuitivní uživatelské menu. V ovládaních jsou nahrány pracovní postupy ke všem typům Vita keramik a další novinkou je speciální software pro použití v zubní ordinaci.



Vacumat 6000M **69.990 Kč**

Vacumat 6000 MP **109.990 Kč**

Vakuová pumpa **21.990 Kč**

vPad comfort **37.990 Kč**

vPad excellence **54.990 Kč**



V60 I-LINE

V60 i-Line včetně vakuové pumpy **119.990 Kč**



Spolehlivá a vysoce výkonná pec pro vypalování keramiky s integrovaným dotykovým displejem s jednoduchým a intuitivním ovládaním. Pec je vybavena ochranou před výpadkem proudu, kontrolovaným rychlým ochlazením a automatickým čištěním. Vypalovací komora a spolehlivá elektronika zajistí dokonalé výsledky vypalování. Pro bezpečné odkládání prací slouží dva integrované stolky.

VITA VM7 / VM9 / VM13

Systém keramických hmot s různým koeficientem teplotní roztažnosti pro fazetování kovových i celokeramických nosných konstrukcí.

Vita VM 12g WO, O, BD, D, EN, WIN, NT **429 Kč**



Vita VM Standard Sety **30% SLEVA**

Vita VM 50g **1.449 Kč**



Akzent Plus prášek sada **11.990 Kč**



Akzent Plus pasta sada **12.990 Kč**



Akzent Plus sprej sada **13.490 Kč**



AKZENT PLUS

S použitím dobarvovacího materiálu Akzent Plus Effect Stains lze velmi jednoduše a přesně reprodukovat nejrůznější opákní barevné efekty a anomálie na povrchu keramiky. Dodává se ve formě prášku nebo pasty. Akzent Plus Body Stains jsou nové transparentní fluorescenční barvy, kterými lze změnit barevný odstín keramiky. Dodává se ve formě prášku, pasty a spreje.

HERACERAM

HeraCeram je ideální volba pro fazetování tradičních konstrukcí z kovových slitin v rozsahu WAK od 13,5 do 14,9 μm/mK. Díky nízké vypalovací teplotě do 880 °C mohou být bezpečně zpracovány všechny slitiny v tomto rozsahu WAK.



HeraCeram doplňková balení **10% SLEVA**

AKCE pro nové uživatele: **1+1 ZDARMA**



HeraCeram Zirkonia doplňková balení **10% SLEVA**

AKCE pro nové uživatele: **1+1 ZDARMA**

HERACERAM ZIRKONIA

HeraCeram Zirkonia je keramika pro fazetování zirkonových konstrukcí s WAK 10,5 μm/mK se stabilizovanou leucitovou strukturou, která chrání proti šíření prasklin, odštipnutí a zlomení.

SIGNUM / SIGNUM CERAMIS

Signum je nanohybridní kompozit pro fazetování korunek a můstků. Je indikován na fazetové fixní korunky a můstky, atraumatické korunky, fazetování snímatelných částí zásuvných spojů a náhrad na implantáty a pro individualizaci umělých zubů. Signum ceramis je velice tvrdý rentgenkontrastní sklokeramický kompozit pro bezkovové náhrady. Používá se pro bezkovové korunky, fazety, inleje, onleje a individualizaci umělých zubů.

AKCE pro nové uživatele: **1+1 ZDARMA**



Signum 4g D, M, EN, ET **699 Kč**

Signum Ceramis 4g D, M, EN **839 Kč**

Signum C+B Opaque 3g **599 Kč**



Signum Metal Bond sada (4 ml Bond I + 4 ml Bond II) **3.499 Kč**

Signum Metal Bond I 4 ml **2.499 Kč**

SIGNUM METAL BOND

Bondovací systém pro spojení kovu s pryskyřicemi nebo kompozity při zhotovování korunek, můstků a skeletů.

Signum Metal Bond II 4 ml **1.499 Kč**

HILITE POWER

HiLite power je stroboskopická polymerační lampa pro všechny dentální světlem tuhnutí materiály. Vytvrzuje např. fazetovací kompozity, kompozity se skelným plnivem, materiály pro pokrývání a individuální otiskovací lžice. Čas polymerace je velmi krátký.

HiLite power **54.990 Kč**

(Ceny nelze kombinovat s dalšími slevami)

+ Signum Ceramis sada **9.990 Kč**

+ Signum Composite sada **10.990 Kč**



CC DISKY

CC Disk NF CoCr

Disk pro CAD/CAM systémy na bázi CoCr bez obsahu niklu a berylia (splňuje požadavky norem pro neušlechtilé slitiny ISO 22674 a pro slitiny určené pro kovokeramické náhrady ISO 9693-1). Jedná se o biokompatibilní slitinu, která se snadno leští a obsahuje velmi málo oxidů, proto je vhodná pro napalování keramiky. Optimální hodnota koeficientu tepelné roztažnosti umožňuje široké spektrum použití disku na různé druhy keramiky.

CC Disk Ti2, CC Disk Ti5

CC Disk Ti2 se používá se pro výrobu korunek, kratších můstků a jednoduchých suprastruktur nesených implantáty.

CC Disk Ti5 se používá pro výrobu tvrdých a pevných konstrukcí, celolitých korunek, delších můstků a suprastruktur nesených implantáty.



CC Disk PMMA, Transparent, Pink, X-Ray Opaque

CC Disk PMMA se používá pro výrobu provizorních náhrad, gingiválních epitéz po zavedení zubních implantátů, pro presovací keramiky a pro ověření okluzních vztahů před vyrobením zirkonových náhrad v plném anatomickém tvaru.

CC Disk PMMA Transparent se používá pro výrobu litých a anatomických konstrukcí, pro presovací keramiky a pro ověření okluzních vztahů před vyrobením větších zirkonových náhrad v plném anatomickém tvaru.

CC Disk PMMA Pink se používá pro výrobu bází pro celkové náhrady, částečné náhrady a pro náhrady sloužící k okamžitému zatížení zubních implantátů jako dlouhodobé provizorní řešení.

CC Disk PMMA X-Ray Opaque se používá pro výrobu rentgenokonstrastního zkušebního modelu pro vhodné umístění implantátu ve vztahu k pozici nahrazovaného zubu.

	8mm	10mm	12mm	13,5mm	14mm	15mm
CC Disk NF CoCr	IN1900	IN1901	IN1902	IN1903		IN1904
Cena Kč	3.198,-	3.326,-	3.326,-	3.435,-		3.653,-
CC Disk Ti5		IN1908	IN1909	IN1910		IN1911
Cena Kč		3.118,-	3.406,-	3.558,-		3.707,-
CC Disk Ti2		IN1916	IN1917	IN1918		IN1919
Cena Kč		3.118,-	3.406,-	3.558,-		3.707,-
CC Disk PMMA – barva dle výběru			IN1931XX		IN1932XX	IN1933XX
A1, A2, A3, B1, B2, B3, B1.1, B1.2, B1.3, E1, E2 Cena Kč			1.346,-		1.430,-	1.463,-
CC Disk PMMA třívrstvý						IN1938A3
Cena Kč						3.746,-
CC Disk PMMA růžový						
Cena Kč						
CC Disk PMMA transparentní			IN1963		IN1964	IN1965
Cena Kč			1.278,-		1.314,-	1.333,-
CC Disk PMMA X-Ray Opaque			IN1970		IN1971	IN1972
Cena Kč			2.398,-		2.451,-	2.474,-
CC Disk Zr		IN1950	IN1951		IN1952	
Cena Kč		2.910,-	3.038,-		3.194,-	
CC Disk Zr – barva dle výběru		IN1950XX	IN1951XX		IN1952XX	
A1, A2, A3 Cena Kč		3.333,-	3.534,-		3.758,-	
CC Disk Zr HT		IN1950HT	IN1951HT		IN1952HT	
Cena Kč		3.194,-	3.333,-		3.430,-	
CC Disk Zr HT – barva dle výběru		IN1950HTXX	IN1951HTXX		IN1952HTXX	
A1, A2, A3, B1, B2, C2 Cena Kč		3.786,-	3.948,-		4.066,-	
CC Disk Zr Smile			IN1951S		IN1952S	
Cena Kč			3.490,-		3.829,-	
CC Disk Zr Smile – barva dle výběru					IN1952SXX	
A1, A2, A3, A3.5 Cena Kč					4.379,-	
CC Disk Zr Multicolor – barva dle výběru					IN1952MCXX	
A2, A3 Cena Kč					6.105,-	
CC Disk Wax – běžový tvrdý					IN1982	
Cena Kč					958,-	
CC Disk Wax – šedý střední						
Cena Kč						

CC Disk Zr

Je vyroben z biokompatibilního předsintrovaného ZrO₂, dodává se jako translucenční Zr a vysoce translucenční Zr HT. Má vynikající mechanické vlastnosti a je chemicky stabilní. Používá se na výrobu plně anatomických náhrad a konstrukcí pro napalování keramiky. Obě varianty translucence jsou k dispozici v probarvené variantě – viz tabulka. Neprobarvené disky lze před sintrací probarvit barvami Vita YZ HT Shade liquid nebo Vita YZ T Coloring liquid.

CC Disk Zr Smile

Je vyroben z biokompatibilního předsintrovaného ZrO₂. Má vynikající mechanické vlastnosti a je chemicky stabilní. Vzhledem ke své výjimečné světelné propustnosti 49 % při 1 mm a průsvitnosti, která je blízká lithiumpodisilikátu, je speciálně navržen pro estetické řešení v oblasti frontálního úseku. Používá se pro výrobu korunek, inlejí, onlejí, fazet a můstků s max. 3 členy ve frontálním úseku.

CC Disk Multicolor

Je vyroben z biokompatibilního předsintrovaného ZrO₂. Má vynikající mechanické vlastnosti a je chemicky stabilní. Používá se na výrobu plně anatomických náhrad.

CC Disk Wax

Je vyroben ze stabilizovaného mikro vosku, který je beze zbytku spalitelný. Stabilizované složení vosku umožňuje frézování s vysokým výkonem frézy. Povrch výrobku je hladký a homogenní. Teplota tání vosku je 120 °C, což vylučuje nebezpečí tavení během frézování a zároveň lze lehce odstranit z frézky.

16 mm	18 mm	20 mm	22 mm	25 mm	27 mm	30 mm
	IN1905					
	4.211,-					
	IN1912	IN1921	IN1922	IN1923		
	4.397,-	4.539,-	4.798,-	5.246,-		
	IN1920					
	4.397,-					
IN1934XX	IN1935XX	IN1936XX		IN1937XX		
1.518,-	1.579,-	1.755,-		1.868,-		
	IN1939A3					
	3.998,-					
				IN1960	IN1961	IN1962
				1.982,-	2.127,-	2.270,-
IN1966	IN1967	IN1968		IN1969		
1.346,-	1.382,-	1.437,-		1.463,-		
IN1973	IN1974	IN1975		IN1976		
2.526,-	2.591,-	2.637,-		2.758,-		
IN1953	IN1954	IN1955	IN1956	IN1957		
3.570,-	3.859,-	3.999,-	4.474,-	5.083,-		
IN1953XX	IN1954XX	IN1955XX		IN1957XX		
4.155,-	4.498,-	4.706,-		5.810,-		
IN1953HT	IN1954HT	IN1955HT	IN1956HT	IN1957HT		
3.839,-	4.226,-	4.638,-	5.494,-	6.035,-		
IN1953HTXX	IN1954HTXX	IN1955HTXX		IN1957HTXX		
4.474,-	4.986,-	5.494,-		6.105,-		
IN1953S	IN1954S	IN1955S		IN1957S		
4.150,-	4.554,-	4.957,-		6.047,-		
IN1953SXX	IN1954SXX					
4.762,-	5.246,-					
	IN1954MCXX		IN1956MCXX			
	7.085,-		7.999,-			
		IN1980				
		1.038,-				
		IN1981				
		1.038,-				

INTERAKCE

DIAMANTOVÁ LEŠTICÍ PASTA

Lešticí pasta je určena ke konečnému leštění a dosažení vysokého lesku u pryskyřic, kompozitů, slitin, keramiky i zirkonu. Přítomnost diamantových částic umožňuje široké spektrum použití a v kombinaci s různými lešticími nástroji lze vytvořit různé stupně lesku.

NOVINKA

Diamantová lešticí pasta 40 g

1.399 Kč



LEŠTICÍ ROTAČNÍ NÁSTROJE BECHT

Doporučené lešticí nástroje pro dokonalé vyleštění dentálních materiálů:



Průměr Ø mm	22	22	7
Materiál	plátno	bavlna	plst
Obj. č.	BT290.1	BT292.1	BT110.1
Cena Kč	49,-	39,-	39,-

BT 290.1 plátěný kotouč – s diamantovou lešticí pastou pro 1. stupeň leštění na hladkých plochách fixních náhrad.

BT 110.1 plstěný kužel – s diamantovou pastou pro 1. stupeň leštění v okluzních plochách.


BT292.1 bavlněný kotouč – s diamantovou pastou pro 2. stupeň leštění k dosažení vysokého lesku. Podle druhu leštěného materiálu volíme otáčky a přítlak nástroje.

NÁSTROJE K+B

Oblíbené nástroje na modelování kompozitních materiálů.

K+B nástroj
žlutý / červený / modrý

299 Kč

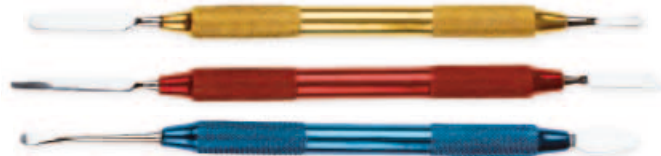

ŠTĚTCE SYNTETICKÉ



Štětce s kvalitním umělým vlasem pro nanášení keramiky.

Štětec 00	INN4171-00	79,-	
Štětec 0	INN4171-0	79,-	
Štětec 1	INN4171-1	79,-	
Štětec 2	INN4171-2	79,-	
Štětec 3	INN4171-3	79,-	
Štětec 4	INN4171-4	99,-	

Štětec 5	INN4171-5	109,-	
Štětec 6	INN4171-6	149,-	
Štětec 7	INN4171-7	169,-	
Štětec 8	INN4171-8	199,-	
Štětec 10	INN4171-10	299,-	
Štětec 12	INN4171-12	399,-	

VYPALOVACÍ PASTA

Pasta určená k podpoře a fixaci celokeramických i metalokeramických prací v keramické peci. Po vypálení lze pastu snadno odstranit. Nově se dodává v kontrastní modré barvě s vylepšenou homogenitou.

Vypalovací pasta 12 g

799 Kč



INTERACRYL CAST

Licí pryskyřice polymerující při nízkých teplotách, která je určena pro zhotovování sedel kovových snímacích náhrad, rebaze, doplňování parciálních náhrad a zhotovení náhrad licí technikou.

Odstíny: bezbarvý (0), světle růžový (3), růžový žilkovaný opákní (5), růžový žilkovaný (10), světle růžový jemně žilkovaný (15) a růžový (16).




Interacryl Cast
500 ml tekutina **899 Kč**

Interacryl Cast sada různé odstíny
350g prášku + 250 ml tekutiny **1.099 Kč**

Interacryl Cast různé odstíny
1000g prášek **1.599 Kč**

GELCAST

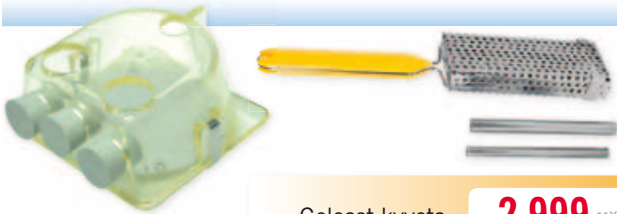

Technika lití akrylátové pryskyřice při zhotovení totální náhrady. Postup je velmi jednoduchý a pomocí této techniky dochází k významné úspoře času při výrobě náhrady.

Gelcast kyveta **2.999 Kč**

Gelcast kyveta
sada **4.699 Kč**

(1 ks Gelcast kyveta, 1 ks držák zubů,
2 ks nástroje na vyřezávání licích kanáleků)

ZUBY CROSS LINKED 2

Sítované pryskyřičné zuby s vynikající odolností vůči abrazi.



Cross Linked 2
4 x 28 ks různé tvary a odstíny **1.179 Kč**



ZUBY SPOFADENT PLUS

Sítované třívrstvé zuby s přísadou fluorescenční látky. Odstíny blízké vzorníku Vita.

Spofadent Plus frontální zuby
6x6 ks různé tvary a odstíny **277 Kč**

Spofadent Plus diatorické zuby
4x8 ks různé tvary a odstíny **248 Kč**

Spofadent Plus kombinace
2x28 ks různé tvary a odstíny **422 Kč**

SUPERACRYL / DURACRYL / PREMACRYL / DURACROL

Superacryl Plus 500g
odstíny O, U, V, X, Z **612 Kč**

Duracryl Plus 500g
odstíny O, U, V, Z **667 Kč**

+ 250 ml
tekutiny **ZDARMA**



Premacryl Plus 500g
odstíny O a V **791 Kč**

Duracrol 500g **841 Kč**

+ 250 ml
tekutiny **ZDARMA**

FRÉZY EDENTA

Tyto a ostatní tvrdokovové frézy z katalogu INTERDENT (str. 226–234)

5 ks + dřevěný stojánek
8 ks + magnetický stojánek

ZDARMA

Typ bříty 26

Titanový břit hrubý



L mm	8,0	8,0	8,0	8,0	13,0
Průměr $\varnothing 1/10$ mm	023	023	016	023	040
Obj. číslo	ED0726.023	ED0826.023	ED1226.016	ED1726.023	ED6926.040
Cena Kč	378,-	378,-	378,-	378,-	496,-



Dřík 104 HP $\varnothing 2,35$ mm

STARTEC

StarTec jsou lešticí gummy s obsahem diamantového zrna vyvinuté pro leštění lithium-silikátu ve dvou krocích.

Výhodou je možnost použití i na silikátové, živcové keramiky, sklokeramiky, zirkonové konstrukce i na leucitové keramiky. Zelená guma (EDST1020) slouží k bezpečnému finalizování tenkých částí zirkonové konstrukce zejména v krčkové oblasti.

StarTec

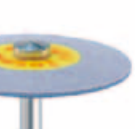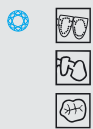

L mm	2,5	2,5	14,0	2,0	2,5	14,0	2,0
Průměr $\varnothing 1/10$ mm	170	170	040	260	170	040	260
Obj. číslo	EDST1020	EDST1030	EDST2030	EDST1530	EDST1040	EDST2040	EDST1540
Otáčky ot./min	10 000	12 000	10 000	5 000	12 000	7 000	5 000
Cena Kč	649,-	649,-	229,-	849,-	649,-	229,-	849,-

CERATEC

Jemné keramické kameny CeraTec jsou určeny pro opracování sintrovaného zirkonu a disilikátu.

Nový kulovitý tvar je vhodný k vypracování okružní plochy a prodloužený kužel k začištění mezizubních prostor u můstků.

CeraTec



10 000–12 000



L mm	11,0	7,0	2,0	8,0	11,0	4,0
Průměr $\varnothing 1/10$ mm	040	035	050	040	035	040
Obj. číslo	ED952.040	ED955.035	ED956.050	ED957.040	ED958.035	ED959.040
Cena Kč	399,-	399,-	399,-	399,-	399,-	399,-



CERAPRO

Speciální keramické kameny s diamantovým plnivem pro opracování všech druhů keramiky, sintrovaného zirkonu a disilikátu. Mají dlouhou životnost, při práci vyvíjejí minimum tepla.

CeraPro

15 000

Standard
Hrubé







L mm	13,0	11,0	3,0	7,0	7,0	2,0	8,0
Průměr $\varnothing 1/10$ mm	050	040	150	120	035	050	040
Obj. číslo	ED8001 • ED8001G	ED8002 • ED8002G	ED8003	ED8004	ED8005	ED8006	ED8007
Cena Kč	399,-	399,-	539,-	539,-	399,-	399,-	399,-

Dřík 104 HP $\varnothing 2,35$

SINTROVANÉ DIAMANTY EDENTA

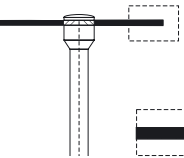Tyto a ostatní sintrované diamanty z katalogu INTERDENT (str. 252–253)

		
L mm	0,60	0,25
Průměr $\varnothing 1/10$ mm	220	220
Obj. číslo	ED5113	ED5122
Cena Kč	997,-	997,-

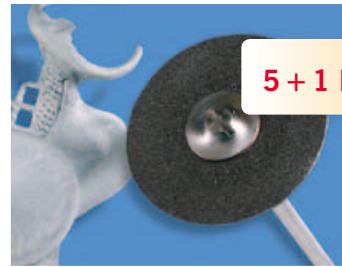

5 + 1 ks **ZDARMA**



NOVINKA

Dynex Brillant 10 ks
20 × 0,2 mm **1.299 Kč**

Dynex Brillant 10 ks
20 × 0,25 mm **1.349 Kč**

Dynex Brillant 10 ks
20 × 0,3 mm **1.459 Kč**

DYNEX BRILLANT

Diamantové částice zajišťují vynikající řezný a brusný výkon s maximální přesností, minimální ztrátou materiálu a dlouhou životností. Extrémně tenký a pružný disk pro precizní separaci mezizubních prostor a broušení plochých povrchů. Minimální vznik tepla a vibrací zabraňuje praskání a odštěpování.

Q BASIC / Q PROFI

Q Basic – nový univerzální bezuhlíkový mikromotor Schick pro běžné laboratorní práce. Dodává se v kolenním, nožním a stolním provedení. Kroutcí moment mikromotoru je 6,7 Ncm, rozsah otáček lze nastavit v rozmezí 1 000–40 000 ot./min.
Q Profi – inovovaný jednoduchý bezuhlíkový mikromotor Schick pro nejnáročnější laboratorní práce. Dodává se v kolenním a nožním provedení. Kroutcí moment je nyní 8,0 Ncm, rozsah otáček lze nastavit u nožní verze v rozmezí 1 000–40 000 ot./min, u kolenní verze v rozmezí 1 000–50 000 ot./min.

Q Basic kolenní,
nožní nebo stolní **29.990 Kč**



Q Profi kolenní
nebo nožní **34.990 Kč**



(Ceny nelze kombinovat s dalšími slevami)

SCHICK QUBE

Nové bezuhlíkové mikromotory Schick jsou k dispozici ve třech variantách. Nejjednodušší QUBE je určen pro jednoduché laboratorní práce, QUBE Plus je konstruován pro všechny běžné práce a pro práce vyžadující vysoké otáčky a sílu motoru je určen QUBE Premium. Mikromotory se standardně dodávají s krátkým násadecem, na přání je možné objednat i klasický dlouhý násadec. Dynamický pedál nebo pedál Start-Stop pro stolní provedení je dodáván jako zvláštní příslušenství. K motorům lze připojit modelovací nůž na vosk.

QUBE kolenní, stolní nebo nožní **38.990 Kč**



QUBE Plus kolenní, stolní nebo nožní **43.990 Kč**

QUBE Premium kolenní, stolní nebo nožní **48.590 Kč**



INTERAKCE

ERKOFORM-3D

Inovovaný typ osvědčeného přístroje pro tepelné tvarování fólií. Mezi přednosti přístroje patří: české pokyny při ovládání dotykového displeje, video průvodce, bezdotykové teplotní čidlo, snadné upínání fólií, údaje o všech fóliích v paměti přístroje, automatické chlazení se zapnutou vakuovou pumpou, akustický i optický signál pro zahájení adaptování fólie, možnost použití fólií až do tloušťky 5,5 mm.

Erkoform-3D+ **41.990 Kč**

Occluform-3 **12.490 Kč**

Erkoform-3D Motion **47.990 Kč**



ERKOLOC-PRO

Erkoloc-pro
všechna balení

-10%



Dvouvrstvá fólie měkká/tvrdá pro výrobu nosičů na bělení, stabilizačních dlah a dlah proti bruxismu. Dodává se v barvě transparentní, modré, zelené a růžové v tloušťce 2, 3, 4 a 5 mm. Transparentní fólie se dodávají také v tloušťce 1 a 1.3 mm. Dodává se v rozměrech: $\varnothing 120$ mm, $\varnothing 125$ mm, 125×125 mm.

PLAYSAFE TRIPLE

Třívrstvá 5,5mm fólie připravená pro výrobu chrániče typu Playsafe heavy-pro. Úvodní set obsahuje: transparentní třívrstvou fólii $\varnothing 120$ mm, vymezovač odlehčení do kusu a přípravek pro fixaci vymezovače v Occluformu. Běžné balení se dodává ve všech barvách Erkoflex color a obsahuje: třívrstvou fólii $\varnothing 120$ mm, pouzdro pro uchování chrániče a vzorek FG-sheet pro vyleštění chrániče.



Playsafe Triple
úvodní set **699 Kč**

Playsafe Triple
různé barvy **499 Kč**

Playsafe Triple
Freestyle různé barvy **699 Kč**

LISKO / LISKOID



Lisko-B – lešticí disky s dlouhou životností pro rychlé opracování termoplastických fólií.

Doporučené otáčky: 10 000 ot./min.

Lisko-S – lešticí disky s polootevřenou strukturou mají 4× vyšší životnost než disky Lisko. Pro všechny druhy prací se používá jedna hrubost. Doporučené otáčky 4 000–12 000 ot./min.

Liskoid – ideální pro vyhlazení mezizubních prostorů u dlah vyrobených z teplem tvarovatelných materiálů. Doporučené otáčky 10 000–15 000 ot./min.

Lisko-B **739 Kč**

(10× disky, 4 podp. kotoučky, 1 mandrel)

Lisko-S **739 Kč**

(10× disky, 4× podpůrné kotoučky, mandrel)

Liskoid **699 Kč**

(6× disky, 4× podpůrné kotoučky, mandrel, páska smirkového papíru)

ERKOGUM

Opakovaně použitelný měkký silikonový materiál pro vyblokování podsekřivých míst.



Erkogum 150g
fialový **529 Kč**

Erkogum 400g
transparentní **969 Kč**

DUOSTAR

Kombinovaný pískovač pro hrubé pískování v komoře s oběhem písku a jemné pískování pomocí dvou trysek s pískem na jedno použití. V násadkách trysek je integrováno LED osvětlení, pracovní pole je tak ideálně osvětleno přímo a bez stínů. V pevné trysce je zaměřovací paprsek, pomocí něhož lze práci přesně umístit a pískování je tak velmi rychlé a efektivní. LED technologie navíc umožňuje detekovat během pískování praskliny v keramice, a tak předejít případným pozdějším reklamacím. Duostar Plus se dodává včetně odsávání s vícestupňovou filtrací Filter Module H. Duostar Z je vybaven přípojkou pro externí odsávání.



Duostar Z **59.990 Kč**

Duostar Plus **79.990 Kč**



Pískovač pro jemné pískování s možností rozšíření až na čtyři moduly pro různé písky, s pískovačem se standardně dodávají moduly dva. V násadkách trysek je integrováno LED osvětlení, pracovní pole je tak ideálně osvětleno přímo a bez stínů. Celá komora je rovněž osvětlena LED, jehož životnost je oproti klasickým žárovkám až desetinasobná.

EasyBlast **38.990 Kč**

LED technologie navíc umožňuje detekovat během pískování praskliny v keramice, a tak předejít případným pozdějším reklamacím. Přístroj je možné napojit k centrálnímu nebo mobilnímu odsávání.

EASYBLAST

STEAMER X3

Parní čistička s jednoduchým ovládáním je vyrobena z odolných dílů. Nádrž na vodu o obsahu 3,7l je nerezová, vnější plášť přístroje je vyroben z nekorodujícího hliníku. Snadné plnění bez nutnosti použití nálevky. Čistička je vybavena vodoznakem.



Steamer X3 **32.890 Kč**

(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)

ULTRAZVUKOVÉ ČISTIČKY EMMI

Emmi 5P **2.799 Kč**



Emmi 5P – kompaktní čistička s nerezovou vanou, objem 0,5l.

Emmi 12HC/20HC/30HC – čističky s nerezovou vanou s vyhříváním, objem 1,2/2,0/3,0l.

Všechny čističky se dodávají s víčkem, košíkem a univerzálním čisticím roztokem.

Emmi 20HC **7.299 Kč**



Emmi 12HC **5.999 Kč**



Emmi 30HC **11.999 Kč**

VZORNÍK VITAPAN CLASSICAL

Klasický Vita vzorník obsahuje 16 odstínů: červenohnědé (A1, A2, A3, A3.5, A4), červenožluté (B1, B2, B3, B4), šedé (C1, C2, C3, C4), červenošedé (D2, D3, D4). Vzorník je možné rozšířit o extrasvětlé bleach odstíny OM1, OM2, OM3.



Vitapan Classical **1.999 Kč**

Vitapan Classical s Bleach odstíny **2.349 Kč**

EXTRACENY

Obj. č.	Název	Výrobce	Původní cena	ExtraCena
AM116170	Smartbox X2	Amann	86.382,-	49.999,-
AM760116	Ceramill blanks ZI 31 6 ks	Amann	8.344,-	3.399,-
BG16274	Motova - nádoba M 1200ml	Bego	11.629,-	4.799,-
BG20502	Adapta fólie červená 0,1 mm 200 ks	Bego	683,-	499,-
BG52400	Bego manžeta velká 4 ks	Bego	1.442,-	999,-
BG52800	Flexi-Serc sada	Bego	3.694,-	1.999,-
BR43001637	Posifix – fixační vosk 50g	Renfert	1.222,-	899,-
BTH90714R4	Habras disky 14 mm, zelené 4 ks	Becht	214,-	139,-
ER531101	UZF fólie 0,1/120 mm, červená 100 ks	Erkodent	756,-	399,-
ER531109	UZF uni fólie 0,1/120 mm, bílá 50 ks (exp. 10/2016)	Erkodent	619,-	299,-
GC003489	Unifast III tekutina 42 ml (exp. 10/2016)	GC	750,-	429,-
GC003490	Unifast III tekutina 104 ml (exp. 11/2016)	GC	1.550,-	899,-
GC005147	Gradia Opaquer OA3,5 2,4 ml (exp. 12/2016)	GC	1.200,-	599,-
HK64707815	Palapress prášek růžový opákní 1000g (exp. 9/2016)	Kulzer	3.583,-	1.999,-
HK64707890	Palapress Vario prášek růžový op. 1000g (exp. 10/2016)	Kulzer	3.583,-	1.999,-
HSC519-17	Pinzeta na korunky s diamantovými hroty 170 mm	Hammacher	2.363,-	1.599,-
HSL247-10	Měřítka Iwanson na vosk 100 mm	Hammacher	711,-	399,-
HSL519-18	Štípací kleště převodové Fantastico	Hammacher	1.541,-	1.149,-
IV593287	IPS InLine Gingiva Opaquer pink 3g (exp. 9/2016)	Ivoclar	850,-	599,-
IV628587	Vzorník Ivoclar s bleach odstíny	Ivoclar	1.431,-	1.199,-
IX36581	Stojánek na líčí kelímky nerezový ø42 mm	SkloPlast	1.703,-	1.349,-
ME114520100	Pinzeta laboratorní zkřížená 15,3 cm	Medin	329,-	259,-
ME155521422	Modelovací nástroj tvar 3	Medin	385,-	299,-
PO7881	Kotouč 85 mm kůže	Polident	231,-	149,-
RE1105-0300	Jacket-Grip	Renfert	1.543,-	999,-
RE500.0000	GEO-Pontics bloky na keramiku	Renfert	2.760,-	1.899,-
SI801SD	Bruska na sádru s diamantovým diskem – suchá	Silfradent	39.136,-	19.999,-
SLO1000MVS	Vibrační nástroj s univerzální koncovkou	Smile Line	4.382,-	2.299,-
SL1030N	U-mid Classic Light míchací destička sada	Smile Line	3.776,-	2.599,-
SL1031	U-mid Classic Light náhradní keramická destička	Smile Line	1.195,-	599,-
SL1500/1	Podložka Hold-on	Smile Line	726,-	459,-
SL4000R	Nástroj SL vibrační koncovka	Smile Line	559,-	369,-
SL4003	Sada nástrojů na porcelán	Smile Line	3.592,-	2.499,-
SL4400	H2O pomůcka pro odkládání štětců – sada	Smile Line	2.153,-	1.399,-
VI0094/16	Akzent Stains 16 3g	Vita	370,-	249,-
VIB255V1	Akzent Plus míchací destička skleněná	Vita	512,-	349,-
VI0086/ES12	Akzent Plus Effect Stains pasta ES12 4g	Vita	532,-	389,-
VI0089/BS02	Akzent Plus Body Spray BS02 75 ml (exp. 9/2016)	Vita	2.556,-	999,-
VIB5051075	Akzent Plus Glaze spray 75 ml	Vita	2.039,-	1.399,-
VIB5052075	Akzent Plus Glaze LT spray 75 ml	Vita	2.169,-	1.399,-
VIB505824	Akzent Plus Glaze LT pasta 4g	Vita	537,-	399,-
VIHP400	In-Ceram Alumina Powder 400g	Vita	8.629,-	3.999,-
VIHP6	In-Ceram Testing Liquid 6ml	Vita	389,-	299,-
WA166998	Zásobník na sádru stolní	Wassermann	74.375,-	37.999,-
ZO1004	Stojanová lampa OTT-LITE Multi 3v1 24 W	Dentasun	4.270,-	2.899,-
ZO9502	Deskové svítidlo DentaSun Classic 2 × 54 W	Dentasun	12.240,-	8.999,-

Termín	Téma	Výrobce	Místo	Přednášející	Cena Kč
3. 5. – 4. 5.	Kovokeramika – pokročilí Praktický nácvik práce s keramikou VITA a doplňujícími sety, glazování VITA Akzent Plus. Možná zabrousíme i na celokeramiku.	VITA	Praha	Tom Arslanian	7.500,-
16. 5.	VITA VM LC a VITA VM LC flow – NOVINKA Jeden fazetovací kompozitní materiál, dvě konzistence, nové možnosti v konceptu VM.	VITA	Ostrava	Čeněk Neruda	2.700,-
20. 5.	Bezkovová keramika Workshop, kde se seznámíte s různými druhy frézovaných konstrukcí. Suprinity VITA VM11, Zirkondioxid VITA VM9, Mark II VITA Add-On, VITA Akzent Plus.	VITA	Praha	Tom Arslanian	2.500,-
20. 5.	VITA keramika VM Koncept – POWER KURZ Jednodenní individuální kurz – vrstvení keramických hmot VITA VM13, použití Professional Kitu, VITA Akzentu Plus a Interna. Řešení barevně náročnějších rekonstrukcí ve frontálním úseku.	VITA	Ostrava	Čeněk Neruda	2.880,-
30. 5. – 31. 5.	VM Koncept – perfektní kombinace materiálů Individuální vrstvení keramických hmot VITA VM13, použití Professional Kitu, VITA Akzentu Plus a Interna. Řešení barevně náročnějších rekonstrukcí ve frontálním úseku.	VITA	Praha	Čeněk Neruda	6.700,-
3. 6.	VITA VM LC a VITA VM LC flow – NOVINKA Jeden fazetovací kompozitní materiál, dvě konzistence, nové možnosti v konceptu VM.	VITA	Praha	Čeněk Neruda	2.000,-
10. 6.	SIRONA inEos X5 a CEREC inLab CAD 15 a CAM 15.1 Seznámení se s programem inLab CAD/CAM a scannerem inEos X5, fréza MCXL a MCX5 open system. STL formáty. Praktická ukázka frézování. Ordinační scanner Apollo.	SIRONA	Praha	Tom Arslanian	700,-
13. 6. – 14. 6.	VM Koncept – perfektní kombinace materiálů Individuální vrstvení keramických hmot VITA VM13, použití Professional Kitu, VITA Akzentu Plus a Interna. Řešení barevně náročnějších rekonstrukcí ve frontálním úseku.	VITA	Ostrava	Čeněk Neruda	5.900,-
27. 6. – 28. 6.	Tepelné tvarování fólií Praktické využití techniky vakuově tepelného tvarování fólií (individuální lžice, sportovní chrániče chrupu, dlahy, nosiče bělicích přípravků, provizorní můstky atd.)	ERKODENT	Praha	Tom Arslanian	5.500,-
5. 9. – 9. 9.	Kombinované práce Modelování korunek, frézování Interlocku a aplikace attachmentů, zatmelování a odlévání fixní části, frézování kovu a příprava pro dublování, dublování a příprava modelu pro voskovou modelaci, modelování skeletu, odlévání a opracování, dokončení skeletu, vložení matrice.	INTERDENT	Celje (SLO)	Mihael Skaza	**0,-
15. 9. – 16. 9.	Tepelné tvarování fólií Praktické využití techniky vakuově tepelného tvarování fólií (individuální lžice, sportovní chrániče chrupu, dlahy, nosiče bělicích přípravků, provizorní můstky atd.)	ERKODENT	Ostrava	Tom Arslanian	5.500,-
22. 9. – 23. 9.	Kovokeramika – mistrovský Žádná barva není problém! Renato Carretti – mistr zubní technik ze Švýcarska v Praze opět ukáže své umění. Individuální vrstvení keramických materiálů VM13 a VM9. Využití hmot VITA Interno v estetice frontálních zubů apod.	VITA	Praha	Renato Carretti, Švýcarsko	*15.000,-
29. 9.	VITA keramika VM Koncept – POWER KURZ Jednodenní individuální kurz – vrstvení keramických hmot VITA VM9, použití Professional Kitu, VITA Akzentu Plus a Interna. Řešení barevně náročnějších rekonstrukcí ve frontálním úseku.	VITA	Ostrava	Čeněk Neruda	2.880,-
30. 9.	SIRONA inEos X5 a CEREC inLab CAD 15 a CAM 15.1 Seznámení se s programem inLab CAD/CAM a scannerem inEos X5, fréza MCXL a MCX5 open system. STL formáty. Praktická ukázka frézování. Ordinační scanner Apollo.	SIRONA	Praha	Tom Arslanian	700,-
13. 10. – 14. 10.	VM Koncept – perfektní kombinace materiálů Individuální vrstvení keramických hmot VITA VM13, použití Professional Kitu, VITA Akzentu Plus a Interna. Řešení barevně náročnějších rekonstrukcí ve frontálním úseku.	VITA	Ostrava	Čeněk Neruda	5.900,-
14. 10. – 15. 10.	"Růžová estetika" u snímatelných náhrad Jedná se o teoretické i praktické školení pro techniky kterým záleží na detailu! Viktor Fürgut mistr zubní techniky patří mezi špičku ve snímatelné protetice. Předvede správnou modelaci na připravených modelech a osvojí si konečnou úpravu a probarvení pomocí pryskyřic Candulor. Každý si tuto techniku prakticky vyzkouší. V ceně školení je oběd a večerní raut s překvapením.	VITA	Praha	Viktor Fürgut, Německo	15.000,-
24. 10.	VITA VM LC a VITA VM LC flow – NOVINKA Jeden fazetovací kompozitní materiál, dvě konzistence, nové možnosti v konceptu VM.	VITA	Ostrava	Čeněk Neruda	2.700,-
26. 10. – 27. 10.	Snímací protetika Teorie výběru zubů podle fyziologie obličeje, registrace mezičelistních vztahů, zastavení modelů do artikulátoru, stavění zubů podle ověřených pravidel, anatomická modelace náhrady měkkých tkání, základní pravidla pro správnou adhezí protězy.	VITA	Ostrava	Tom Arslanian	6.500,-
3. 11. – 4. 11.	VM Koncept – perfektní kombinace materiálů Individuální vrstvení keramických hmot VITA VM13, použití Professional Kitu, VITA Akzentu Plus a Interna. Řešení barevně náročnějších rekonstrukcí ve frontálním úseku.	VITA	Praha	Čeněk Neruda	6.700,-
7. 11. – 9. 11.	Kovokeramika – základní Základní vrstvení keramických hmot z materiálu VM13 nebo VMK Master. Seznámení s teorií (modelace, opracování, vhodné slitiny) i praxí (dvě korunky a tříčlenný můstek).	VITA	Praha	Michal Nový	6.000,-
11. 11.	VITA VM LC a VITA VM LC flow – NOVINKA Jeden fazetovací kompozitní materiál, dvě konzistence, nové možnosti v konceptu VM.	VITA	Praha	Čeněk Neruda	2.000,-
3 dny (září–listopad), termín bude určen	Zásuvné spoje SphäroLock – hybridní náhrada Zhotovení snímatelné náhrady z lící pryskyřice kotvené dvěma aktivovatelnými kulovými retenčními prvky.	ZL MICRODENT	Milevsko	Milan Kořánek	8900,-
2 dny (září–listopad), termín bude určen	Protetika a implantáty Orientace v názvosloví, rozdělení jednotlivých konstrukčních dílů, zhotovení modelu včetně gingivální masky, zhotovení kovové konstrukce nesené implantáty.	INTERDENT	Milevsko	Milan Kořánek	11.640,-
3 dny (září–listopad), termín bude určen	Zásuvné spoje AcryLock Zhotovení konstrukce fixní a snímatelné části protetické náhrady, při použití dvou variant zásuvných spojů AcryLock.	ZL MICRODENT	Milevsko	Milan Kořánek	8.300,-
2 dny (září–listopad), termín bude určen	Tepelné tvarování fólií Praktické využití techniky vakuově tepelného tvarování fólií v zubní laboratoři (individuální lžice, chrániče chrupu, dlahy, nosiče bělicích přípravků, provizorní můstky atd.)	ERKODENT	Milevsko	Milan Kořánek	6.500,-
3 dny (září–listopad), termín bude určen	Skelety Vyhodnocení modelu s použitím paralelometru, návrh vhodných kotevnic prvků, statika a geometrie budoucí skeletové náhrady. Zhotovení deskové náhrady se třemi kotevními prvky.	BEGO	Milevsko	Milan Kořánek	8.900,-
2 dny (září–listopad), termín bude určen	Teleskopická náhrada Teleskopická náhrada – jednoduše bez stresu. Zhotovení primárních a sekundárních dílů teleskopické náhrady z náhradního kovu s použitím speciální frikční fólie Usig.	ERKODENT	Milevsko	Milan Kořánek	11.990,-

* 50% ceny hradí INTERDENT a výrobce.

** Kurz, použité materiály a obědy jsou zdarma. Účastník si hradí dopravu, ubytování a stravu.



INTERDENT
REF 1903
CC DISK NP CoCr 13, 5mm
LOT 50273



SLEVA 20% NA VŠECHNY CC DISKY

NOVINKY
CC DISKY ZR MULTICOLOR
CC DISKY ZR SMILE