

INTERAKCE

2/2016
LABORATOŘ



INTERDENT®

Identica

SPOLEHLIVÉ, PŘESNÉ A RYCHLÉ **SKENERY** PROVOZOVANÉ
BEZ LICENČNÍCH POPLATKŮ A UMOŽŇUJÍCÍ EXPORTOVAT SOUBORY
V OTEVŘENÉM FORMÁTU STL

Identica Blue

Identica Blue s SW Exocad

449.900 Kč

- Modré světlo
- Přesnost 10 μ m
- Skenování artikulátoru
- Skenování otisků
- Ergonomický design



Identica Hybrid

NOVÝ MODEL S VYLEPŠENÝMI VLASTNOSTMI



- Skenování za 16 sekund
- Radikálně zvýšená komprimace dat (až o 84 %)
- Tři kamery (skenování v barvě)
- Flexibilní Multi-die (skenování více objektů najednou)
- Přesnost 7 μ m
- Tříosé rameno (umožňuje skenovat komplikované objekty)
- Skenování oboustranného otisku



Identica Hybrid s SW Exocad

499.900 Kč

MOLDASTONE CN

Velmi tvrdá tixotropní syntetická sádra v barvách slonová kost, šedá, světle hnědá, světle zelená, růžová, světle růžová.
Tvrdość 220 N/mm² po 1 hodině.



Moldastone CN 4,5 kg
různé barvy

459 Kč

Moldastone CN 18 kg
(4 x 4,5 kg) různé barvy

1.799 Kč



ARTIPLASTER

Speciální rychle tuhnoucí sádra s velmi nízkou expanzí pro fixaci modelů v artikulátoru.

Artiplaster
5 kg

529 Kč

Artiplaster
20 kg

1.499 Kč

OKLUDORY

Jednoduché okludory pro práce malého rozsahu.

Okludor malý

239 Kč

Okludor velký

239 Kč



G2 CONCEPT

Elektrická pilka na modely s diamantovým diskem a laserovým zaměřováním, které zajišťuje pohodlné polohování a přesné určení místa řezu. Přístroj má měkký start a vysokou úroveň bezpečnosti práce. Velká výhoda je rozřezávání modelu zdola nahoru, takže se neporuší body kontaktu. Přístroj je možné připojit na odsávací zařízení.

G2 Concept

69.990 Kč



GIROFORM

Inovovaný systém na výrobu modelu, který díky redukci expanze sádky zpřesňuje práci. Model má dokonalý vzhled, jeho zhotovení je rychlé a velmi hospodárné.

Giroform destičky Classic L
100 ks bílé nebo modré

1.859 Kč

Giroform destičky
Premium+ L 100 ks

2.299 Kč

Giroform čepy
1000 ks

789 Kč



Giroform

53.890 Kč

+ Giroform
Starter Kit

ZDARMA



(Cenu přístroje nelze kombinovat s dalšími slevami)



Video s pracovním postupem na adrese: www.interdent.cz/Vzdělávání/Pracovní_postupy/Schick-Dental/Užívání_pilky_G2_Concept

MODELSYSTEM 2000

Modelový systém, který velmi zjednoduší přípravu modelu. Jeho použitím se uspoří až 20 % materiálu; model je zhotoven během 10 minut se 100% přesností. Destičky se dodávají ve dvou velikostech – velká a malá. Transportní destička slouží k přenášení modelů s pracemi mezi laboratoří a ordinací. Na rozdíl od pracovní destičky má transportní destička pouze plastové čepy.



Modelsystem 2000 sada

4.499 Kč

(150 ml izolační tekutina, 3 sady kompletní destička malá, 2 sady kompletní destička velká, 2 ks manžeta malá, 1 ks manžeta velká, 3 ks transportní destička malá, 2 ks transportní destička velká, 1 ks šroub malý, 1 ks šroub velký, 1 ks poziční destička malá, 1 ks poziční destička velká)

Modelsystem 2000 pracovní destička velká nebo malá

699 Kč

Modelsystem 2000 transportní destička velká nebo malá

39 Kč



INTERDUPLICAST

Dvousložková silikonová dublovací hmota adičního typu. Vysoká elasticita zaručuje snadné vyjmutí dublovaného modelu a vysokou přesnost kresby detailů.

Interduplicast
1 + 1 kg

1.799 Kč

Interduplicast
5 + 5 kg

8.899 Kč

PATTERN RESIN LS

Osvědčená modelovací pryskyřice s velmi nízkou kontrakcí. Snadno se opracovává a velmi dobře reprodukuje detaily. Je tvrdá, pevná a velmi stabilní i v tenké vrstvě. Shoří beze zbytků, takže povrch odlitků je velmi čistý. Používá se pro attachmenty, fixace, v implantologii a pro galvanofórmování.

Pattern Resin LS
sada

2.199 Kč

(100 g prášek, 105 ml tekutina, příslušenství)

+ **víceúčelové
hodiny GC**

ZDARMA



GINGIFAST

Silikonový materiál na zhotovení modelu otištěné gingivy ztracené Thomsonovým řezem. Používá se z estetických důvodů u všech typů snímákových náhrad a to zejména ve frontálním úseku. Umožňuje zhotovení fixní i snímákové části u kombinovaných náhrad na jednom modelu. Gingifast Rigid se používá na zhotovení konstrukcí na implantáty.

Gingifast Elastic
/ Rigid

999 Kč

(2 x 50 ml Gingifast Elastic / Rigid, 10 ml Separator, 12 ks míchací kanyly, 12 ks intraorální koncovky)

INTERTRAY, INTERLUX

Intertray – světlem polymerující bazální desky pro zhotovení individuálních otiskovacích lžic.

Interlux – lampa pro polymeraci světlem tuhneoucích materiálů.

Intertray 50 ks

1.249 Kč



Interlux

4.449 Kč



MODELOVACÍ VOSKY INTERDENT

Přírodní biologicky nezávadné modelovací vosky v několika barvách pro různé použití – cervikální (červený měkký nebo fialový tvrdší), korunkové (modrý měkký, okrový, slonová kost nebo medový opákní tvrdší), okluzální (tyrkysový nebo modrošedý), frézovací (zelený) a univerzální (šedý). Modrý modelovací vosk je vhodný pro všechny typy presovacích keramiky. Modelovací vosky In Press jsou určeny k modelování korunek, můstků a inlejí, jsou vhodné i pro presovací keramiku. Dodávají se zelené nebo v barvě medu.



Modelovací vosky
70g

259 Kč

Modelovací vosky
In Press 70g

259 Kč

Skenovací vosk 70g

499 Kč



SKENOVACÍ VOSK

Vosk v modré barvě s vysokou opacitou, která zabraňuje nežádoucím odleskům. Tak je zajištěn optimální přenos dat při skenování. Obsahuje anorganické částice, teplota tání je 62 °C.

DISTANČNÍ LAK

Lak na izolaci pahýlů nerozpustný jinými izolačními prostředky. Jediným nanesením při ideální hustotě se docílí vrstvy 10 mikronů, což je dostatečný prostor pro cement. Lak rychle zasychá a po ztvdnutí je odolný proti mechanickému ořezu. Použití je vhodné pro zhotovení kapniček z vosku i kapniček z plastové fólie.

Distanční lak 16 ml
stříbrný / zlatý / červený

269 Kč

Ředidlo 30 ml

269 Kč



Elektrický
modelovací nůž

6.499 Kč



ELEKTRICKÝ MODELOVACÍ NŮŽ

Elektricky vyhřívaný nůž pro modelaci s plynulým nastavením teploty. K dispozici je deset různých typů koncovek, s přístrojem se dodávají čtyři nejpoužívanější.

WAX CENTER

Přístroj se skládá z kapničkovače Termotop a dvou elektricky vyhřívaných modelovacích nožů. U Termotopu lze nastavit teplotu v rozmezí 30–105 °C s přesností ± 3 °C. Současně je možné rozehtívat až tři druhy vosku. U modelovacích nožů je teplota nastavitelná v rozmezí 30–250 °C a lze použít 10 typů výměnných koncovek. Zvolená teplota je během práce konstantní. Wax Center je ideální pro laboratorní stůl se dvěma pracovními místy.



Wax Center

10.999 Kč

Kahan Blazer

2.199 Kč



KAHAN BLAZER

Mobilní ruční kahan s piezoelektrickým zapalováním a nastavitelným plamenem. Maximální teplota 1 300 °C.

+ náhradní náplň

ZDARMA

I-BOND NF

Slitina k napalování keramiky na bázi Cr-Co, neobsahuje nikl, berylium ani galium.



I-Bond NF
1000g **6.499 Kč**

I-Bond NF
250g **1.899 Kč**



I-BOND 02 / I-BOND LO

Cenově výhodné chromniklové slitiny k napalování keramiky bez obsahu berylia. I-Bond LO se vyznačuje velmi nízkou oxidací.

I-Bond 02/LO
1000g **4.799 Kč**

I-Bond 02/LO
250g **1.399 Kč**

I-GW

Chromniklová slitina na korunky a můstky pro fazetování plasty.



I-GW
1000g **3.799 Kč**

I-GW
250g **1.049 Kč**



I-MG / I-MG HE

Slitiny určené ke zhotovení skeletů vyznačující se velkou odolností proti korozi. I-MG HE je vysoce elastický a umožňuje opakovanou aktivaci spon.

I-MG
1000g **4.499 Kč**

I-MG HE
1000g **4.999 Kč**

WIRON 99

Nejpoužívanější slitina pro napalování keramiky a pro fazetování pryskyřičnými materiály, neobsahuje berylium.



Wiron 99
250g **2.699 Kč**

Wiron 99
1000g **9.799 Kč**



WIROBOND C, WIROBOND 280

Chromkobaltové slitiny bez příměsi niklu a berylia pro napalování keramických hmot a pro fazetování pryskyřičnými materiály.

Wirobond C/280
250g **2.799 Kč**

Wirobond C/280
1000g **9.999 Kč**

INTERVEST K+B SPEED

Velmi přesná univerzální fosfátová zatmelovací hmota pro zhotovení korunek a můstků z drahokovových i náhradních slitin. Je určena pro konvenční i rychlé vypalování. Mísící tekutina: Expasol.



Intervest K+B Speed
6,5 kg (41 × 160 g)

1.199 Kč

Expasol
1 litr

349 Kč

INTERFINE K+B SPEED

Velmi jemná zatmelovací hmota pro vypalování korunek, můstků a pro presovací keramiku. Vypalování je možné rychlou nebo klasickou metodou. Větší expanze lze docílit vyšší koncentrací Expasolu. Mísící tekutina: Expasol.



Interfine K+B Speed
6,5 kg (41 × 160 g)

1.399 Kč

Expasol
5 litrů

1.299 Kč

MODELCAST, MODELCAST S

Fosfátové zatmelovací hmoty pro skeletové náhrady. Modelcast se používá pro dublování silikonovými i agarovými hmotami. Modelcast S pro dublování silikonovými hmotami, je možné jej vyhřívat i rychlou metodou až druhý den po zatmelení. Mísící tekutina: Expasol.



Modelcast 12 kg
(30 × 400 g)

1.399 Kč

Modelcast S
12 kg (30 × 400 g)

1.499 Kč

Fornax T

229.990 Kč



FORNAX T

Stolní provedení odstředivého vysokofrekvenčního indukčního lícího přístroje. Použitelný pro všechny druhy dentálních slitin (mimo titan) s lící teplotou do 1550 °C. Přístroj je vybaven oběhem chladicí vody a přepínačem pro lití v keramickém nebo grafitovém kelímku.

SMARTMIX X2

Vakuová míchačka se speciálním tvarem míchadla, které zajišťuje naprosto homogenní horizontální i vertikální promíchání materiálu. Všechny parametry míchání – čas, rychlost, smysl otáček, interval, předmíchání, prevakuum, postvakuum a název programu – lze zadat velmi jednoduše. Přístroj je možné zavěsit na stěnu nebo postavit na stůl za použití stojanu, který se dodává jako zvláštní příslušenství. S míchačkou se dodává nádoba o objemu 500 ml.



Smartmix X2

34.990 Kč

(Cenu nelze kombinovat s dalšími slevami)



KERAMICKÁ PÁSKA

Keramická páska do lících kroužků umožňuje expanzi zatmelovací hmoty.

Keramická páska
v kotouči 10 m

219 Kč

Keramická páska
v kotouči 30 m

489 Kč

VITA VM7 / VM9 / VM13

Systém keramických hmot s různým koeficientem teplotní roztažnosti pro fazetování kovových i celokeramických nosných konstrukcí.

Vita VM
Standard Sety

30 % SLEVA



Vita VM 12 g WO, O, BD,
D, EN, WIN, NT

429 Kč

Vita VM 50g

1.449 Kč

Vita VMK Master
Standard Sety

30 % SLEVA



Vita VMK Master 12 g
WO, O, OD, D, EN, WIN, N, T

339 Kč

Vita VMK Master 50g

1.199 Kč

VITA VMK MASTER

Nejnovější zástupce řady VMK. Zachovává standardní vrstvení dentinu a skloviny jako jeho předchůdce VMK 95. VMK Master má minimální smrštění, vylepšené modelovací vlastnosti a ideální koeficient teplotní roztažnosti (WAK) pro napalování na všechny běžně používané slitiny. Dodává se v odstínech dle vzorníků Vita 3D-Master a Classical.

VACUMAT 6000

Poslední generace keramických pecí Vacumat 6000 M v lakovaném (na přání v nerezovém) provedení pro pálení všech dentálních fazetovacích keramik. Vacumat 6000 MP umožňuje zhotovení keramických náhrad presováním i napalováním fazetovacích keramických hmot. Modulární systém dává možnost výběru ze dvou typů dotykových ovládaní (vPad comfort – pro dvě pece, vPad excellence – až pro čtyři pece) s různým stupněm funkčního vybavení. Nově jsou obě tato ovládaní podsvícena LED světlem a mají intuitivní uživatelské menu. V ovládaních jsou nahrány pracovní postupy ke všem typům Vita keramik a další novinkou je speciální software pro použití v zubní ordinaci.

Vacumat 6000 M

69.990 Kč

Vacumat 6000 MP

99.990 Kč

Vakuová pumpa

21.990 Kč

vPad comfort

34.990 Kč

vPad excellence

47.990 Kč



V60 I-LINE

V60 i-Line

89.990 Kč

Vakuová pumpa

21.990 Kč



Spolehlivá a vysoce výkonná pec pro vypalování keramiky s integrovaným dotykovým displejem s jednoduchým a intuitivním ovládním. Pec je vybavena ochranou před výpadkem proudu, kontrolovaným rychlým ochlazováním a automatickým čištěním. Vypalovací komora a spolehlivá elektronika zajistí dokonalé výsledky vypalování. Pro bezpečné odkládání prací slouží dva integrované stolky.

VITA PM9

Presovací keramika PM9 je vyráběna z jemnozrnné keramiky VM9. Dodává se ve standardních rozměrech umožňujících použití nejen v pecích VITA, ale i v pecích ostatních výrobců. Velmi zdařilá estetika materiálu PM9 v provedení O, T, HT umožňuje zhotovovat dokonalé inleje, onleje, fazety a korunky v plném nebo redukovaném anatomickém tvaru. Dodává se v deseti odstínech vzorníku Vitapan 3D-Master.



Vita PM9
Accessory Kit

9.499 Kč

Vita PM9
sada O, T, HT

15.999 Kč

Vita PM9
pelety 5 ks

1.599 Kč



Vita VM9
Add-On Kit

7.999 Kč

Vita VM9
Add-On 12 g

549 Kč

VITA VM9 ADD-ON

Fazetovací keramika pro estetické dokončení náhrad zhotovených presovací metodou. Jedná se o keramiku s nízkým bodem tavení, aby velmi přesné okraje vylišané náhrady zůstaly zachovány a nedocházelo k jejich zdeformování. Dodává se v osmi odstínech, převážně použitelných v incizální oblasti náhrady.



SIGNUM / SIGNUM CERAMIS

Signum je nanohybridní kompozit pro fazetování korunek a můstků. Je indikován na fazetové fixní korunky a můstky, atraumatické korunky, fazetování snímatelných částí zásuvných spojů a náhrad na implantáty a pro individualizaci umělých zubů. Signum ceramis je velice tvrdý rentgenkontrastní sklokeramický kompozit pro bezkovové náhrady. Používá se pro bezkovové korunky, fazety, inleje, onleje a individualizaci umělých zubů.

**AKCE pro nové
uživatelé: 1+1**

ZDARMA



Signum 4g
D, M, EN, ET

699 Kč

Signum Ceramis 4g
D, M, EN

799 Kč

Signum C+B
Opaque 3g

589 Kč



SIGNUM FLOW

Rentgenkontrastní kompozit s mikrofilním plnivem, který je určen k fazetování kovových konstrukcí. Flow konzistence urychluje a zjednodušuje nanášení kompozitu. Materiál je tixotropní a lze jej nanášet přímo ze stříkačky nebo pomocí štětce. Jeho mechanické vlastnosti jsou stejné jako Signum Matrix, je možné jej kombinovat se Signem Composite, Signem Ceramis i Signem C&B Opaquer. Novinkou jsou CV hmoty, které zintenzivňují barvy v cervikální oblasti.

Signum flow
Essentia Set

12.999 Kč

Signum flow 4g

699 Kč

HILITE POWER

HiLite power je stroboskopická polymerační lampa pro všechny dentální světlem tuhnoucí materiály. Vytvrzuje např. fazetovací kompozity, kompozity se skelným plnivem, materiály pro vykrývání a individuální otiskovací lžice. Čas polymerace je velmi krátký.



HiLite power

54.990 Kč

(Ceny nelze kombinovat
s dalšími slevami)

+ Signum Ceramis
sada

9.999 Kč

+ Signum Composite
sada

10.999 Kč

DIAMANTOVÁ LEŠTICÍ PASTA

Lešticí pasta je určena ke konečnému leštění a dosažení vysokého lesku u pryskyřic, kompozitů, slitin, keramiky i zirkonu. Přítomnost diamantových částic umožňuje široké spektrum použití a v kombinaci s různými lešticími nástroji lze vytvořit různé stupně lesku.

NOVINKA

Diamantová lešticí pasta 40 g

1.399 Kč



NÁSTROJE SMILE LINE

Nástroje na opaker

789 Kč



Nástroje na nanášení keramického opakeru.

4000-OP1: Nástroj s malou Al_2O_3 kuličkou

4000-OP2: Nástroj s velkou Al_2O_3 kuličkou

Pinzety do korunek

799 Kč



Měkké pinzety do korunek mají průhledné gumové koncovky, náhradní koncovky jsou součástí balení.

4000-SG1: Pinzeta jednoduchá

4000-SG2: Pinzeta zdvojená na moláry

4000-SG3: Pinzeta mini

ŠTĚTCE INTERDENT – KOLINSKY

Štětce jsou zhotoveny z nejkvalitnější velmi elastické srsti sibiřské kuny. Špičky štětců jsou tenké jako jehly a mají výborné absorpční vlastnosti. Tvar násadky umožňuje pohodlné držení.



Kolinsky 0

99 Kč



Kolinsky 1

99 Kč



Kolinsky 4

179 Kč



Kolinsky 6

249 Kč



Kolinsky 8

489 Kč

OCCLUSPRAY

Occluspray 75 ml zelený nebo červený

279 Kč



Ke zjištění bodu kontaktu mezi protetickými výrobky a antagonisty nebo mezi protetickými výrobky a nosnými pilíři jak v ordinaci, tak v laboratoři.

EASYSHADE V

Již 5. generace přístroje pro spektrofotometrické digitální měření odstínu přirozených i vybělených zubů podle vzorníku Vitapan Classical a 3D-Master nebo ověření odstínu na zhotovené náhradě či kontrolu odstínu zirkonoxidových bloků. Easyshade V má nový barevný dotykový displej, určuje a kontroluje barvy zubu s přesností, která je ve srovnání s výkonností lidského oka dvojnásobná. Nový software nabízí například funkce: baterie s ochranou proti samovybití, indukční nabíjení, spojení se smartphone aplikací Vita mobileAssist pro sdělování informací o barvě mezi ordinací a laboratoří, spojení s Vita Assist SW. Je možné zapůjčit na vyzkoušení.



Easyshade V

46.990 Kč

+ tablet Samsung Galaxy 7"

ZDARMA

(Do vyprodání zásob)

ERKOFORM-3D

Inovované typy osvědčeného přístroje pro tepelné tvarování fólií. Jejich přednosti jsou: české pokyny při ovládání dotykového displeje, video průvodce, bezdotykové teplotní čidlo, snadné upínání fólií, údaje o všech fóliích v paměti přístroje, automatické chlazení se zapnutou vakuovou pumpou, možnost použití fólií až do tloušťky 5,5 mm. Erkoform-3D Plus vydává akustický i optický signál pro zahájení adaptování fólie. Erkoform-3D Motion provede nahřátí a adaptování fólie na model automaticky bez přítomnosti obsluhy.



Erkoform-3D+ **41.990 Kč**

Occluform-3 **12.490 Kč**

Erkoform-3D Motion **47.990 Kč**



ERKOFLEX BLEACH



Transparentní fólie o síle 1 mm pro zhotovení nosičů na bělení a fluoridaci. Flexibilní materiál s vysokým stupněm elasticity se velmi dobře adaptuje. Nový typ je opatřen izolační fólií UZF plus, která zajistí dokonalou průhlednost fólie i po tepelném tvarování. Fólie se dodávají v průměrech 120 cm a 125 cm, čtvercové 125 × 125 cm.

Erkoflex Bleach 20 ks různé rozměry **699 Kč**

Erkoflex Bleach 100 ks různé rozměry **2.799 Kč**

NŮŽKY NA FÓLIE

Speciální nůžky na všechny měkké fólie a na tvrdé fólie do síly 1 mm.

Nůžky na fólie **999 Kč**



KLEŠTĚ NA ODDĚLENÍ MODELU OD FÓLIE




Speciální kleště pro snadné sejmutí termoplastických fólií z modelu. Použití kleští snižuje pravděpodobnost poškození modelu.

Kleště **1.099 Kč**

QUICK 2

Sada nástrojů pro opracování a konečné leštění všech termoplastických materiálů.

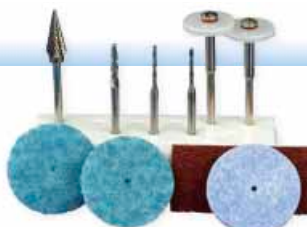

Quick 2 sada **1.799 Kč**

(1 × fisurka, 2 × spirálové vrtáky, 1 × kónická tvrdokovová fréza, 2 × Lisko-S, 1 × Liskoid, páska smirkového papíru, 2 × mandrely, 4 × podpůrné kotoučky)



ERKOSKIN

Vykrývací silikonový materiál, který se používá např. jako mezerník při výrobě dlah pro bělení. Zůstává elastický, je odolný vůči kyselinám i zásadám, rychle tuhne a dá se beze zbytku odstranit.

Erkoskin 50 ml **529 Kč**



ZUBY MFT

Multifunkční zuby v kompletním indikačním spektru v kompaktním sortimentu VITA MFT. Ideálně sestavená redukovaná nabídka barev a tvarů zajišťuje vysokou hospodárnost. Používají se pro totální protézy, implantační protetiku, teleskopické a konusové konstrukce, zásuvné spoje a modelové odlévané protézy. MFT jsou k dispozici v 11 odstínech 3D-Master (1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 3L1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4L1.5, 4M2, 5M1) a 13 odstínech VITA Classical (A1, A2, A3, A3.5, A4, B1, B2, B3, C2, C3, C4, D3, D4).

**VÝHODNÝ NÁKUP ZUBŮ MFT
S PRAKTICKÝM ZÁSOBNÍKEM!**



MFT přední
nebo zadní



179 Kč



ZUBY CROSS LINKED 2

Sítované pryskyřičné zuby s vynikající odolností vůči abrazi.

Cross Linked 2
4 × 28 ks různé tvary a odstíny

1.179 Kč

INTERACRYL HOT

Teplem polymerující metylmetakrylátová pryskyřice se zkrácenou dobou polymerace, bez kadmia, pro celkové náhrady a rebaze. Odstíny: bezbarvý (0), světle růžový (3), růžový žilkovaný opákní (5), růžový žilkovaný (10N), světle růžový jemně žilkovaný (15) a růžový (16).

Interacryl Hot sada různé odstíny
(1 kg prášku + 500ml tekutiny)

1.099 Kč



Meliodent HC
1000 g

899 Kč

Meliodent HC
tekutina 500 ml

319 Kč



MELIODENT HC

Teplem polymerující metylmetakrylátová pryskyřice bez kadmia. Doba zpracovatelnosti těsta je až 60 minut, což je velkou výhodou při výrobě většího množství náhrad. Pryskyřice je mechanicky velmi odolná, barevně stabilní a s minimálním obsahem zbytkového monomeru.

Dodává se v odstínech bezbarvý (01), růžový (03), žilkovaný (04), růžový standard (21), žilkovaný růžový (26), žilkovaný plus (27), žilkovaný FR (29), žilkovaný D30 (42), růžový L.R. (43), růžový SR (46), žilkovaný TL (48).

VITACOLL

Prostředek pro zlepšení vazby pryskyřičných zubů na bazální pryskyřici.



Vitacoll
100 ml

579 Kč



Stomaflex Varnish
140 g

209 Kč

STOMAFLEX VARNISH

Silikonová izolační hmota, která se používá při výrobě snímatelných náhrad, kde vytváří potřebnou izolační a fixační vrstvu kolem pryskyřičných zubů před zakryetováním. Má vynikající přilnavost k sádrovým podkladům bez nutnosti použití retenčních perel. Snadno se odstraňuje z dokončené náhrady.

DRÁT KULATÝ TVRDÝ

Kulatý sponový drát je vyroben z nerezavějícího materiálu. Je určen pro ortodoncii a snímání náhrady, dobře drží tvar a nepraská. Dodává se v silách a délkách podle tabulky.

Průměr	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2
Délka	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m	3 m
Cena	109 Kč	109 Kč	109 Kč	109 Kč	119 Kč	119 Kč	119 Kč
Délka	40 m	30 m	20 m	10 m	10 m	10 m	10 m
Cena	469 Kč	389 Kč	389 Kč	289 Kč	289 Kč	299 Kč	319 Kč



Prothyl Polymer

25.990 Kč



PROTHYL POLIMER

Varný polymerátor určený pro polymeraci dentálních pryskyřic. Přístroj je řízen mikroprocesorem s deseti programy, z nichž každý má 5 programových fází s nastavitelnou teplotou a časem. Celková kapacita jsou 4 kyvety. Celonerezové provedení zajišťuje dlouhou životnost.

ZL ACRYLOCK

Acrylock patří do početné skupiny zásuvných spojů válcového tvaru s vertikální osovou orientací. Plastový předtvar je plně spalitelný. Tři typy matic s rozdílným frikčním účinkem jsou označeny barevně. Výhodou je z jedné strany uzavřená plastová matrice, která umožňuje pružné dosednutí patrice. Patrice může být kombinována s dvoudrážkovým stabilizátorem plnicím i funkci opěrného prvku.

ZL AcryLock 10 ks
matrice / patrice / stabilizátor

989 Kč



ZL AcryLock
sada

3.999 Kč

(10× patrice, 10× stabilizátor, 10× zelená,
6× žlutá a 6× červená matrice)

VARIO SOFT 3 / VARIO SOFT 3 MINI

Systém zásuvných spojů s mnoha možnostmi použití, s několika typy válcovité patrice. Matrice jsou dostupné ve třech barevně odlišených stupních frikce: zelená – nízká frikce, žlutá – střední frikce, červená – vysoká frikce a dále bílá – dublovací matrice. Typy patric a jejich indikace: VS3 a VS3 mini (fixační spoj pro kombinované náhrady), VS3 sv a VS3 mini sv (patrice s integrovaným opěrným prvkem).

VS3 mini / VS3 mini sv
matrice 8 ks

1.139 Kč

VS3 matrice 8 ks

1.189 Kč

VS3 / VS3 sv / VS3 mini /
VS3 mini sv patrice 8 ks

1.399 Kč

FRÉZOVACÍ PŘÍSTROJ S1

Inovovaný jednoduchý frézovací přístroj s podstavcem pro komfortnější práci. Lze u něj velmi jednoduše měnit frézovací a analyzační vřeteno. Dodává se v kompletu s novým výkonným bezuhlíkovým mikromotorem řady Q a se stolkem na modely. Jako jedno z příslušenství je možné dokoupit dynamický nožní spínač nebo spínač typu start/stop. Lze koupit i bez motoru jako paralelometr s inovovaným vřetenem s rozsahem upínání 0,5 až 3 mm. Standardní součástí je kleština 2,35 mm, na přání 3,00 mm.



NOVINKA

S1 Basic Frézovací
přístroj komplet

72.990 Kč

S1 Basic
Paralelometr

34.990 Kč

FRÉZY EDENTA








Tyto a ostatní tvrdokovové frézy z katalogu INTERDENT (str. 226–234)

5 + 1 ks

ZDARMA

Typ bříty 25

Spirálový břit
extrajemný

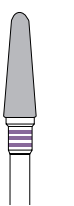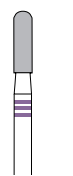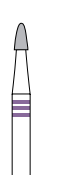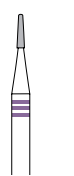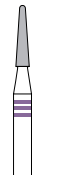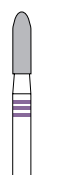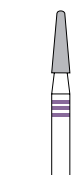

L mm	8,0	8,0	8,0	4,0	3,5	8,0	13,5	14,0
Průměr $\varnothing 1/10$ mm	023	023	016	008	014	023	040	060
Obj. číslo	ED0725.023	ED0825.023	ED1225.016	ED1325.008	ED1425.014	ED1725.023	ED6925.040	ED7225.060
Cena Kč	378,-	378,-	378,-	220,-	378,-	378,-	496,-	496,-

Dřík 104 HP $\varnothing 2,35$ mm

SINTROVANÉ DIAMANTY

Tyto a ostatní sintrované diamanty z katalogu INTERDENT (str. 252)

5 + 1 ks

ZDARMA

JEMNÉ



Průměr $\varnothing 1/10$ mm	037	037	037	037	037	016	018	031	027	022	020	037	050
L mm	2,5	10,0	10,0	10,0	8,0	6,0	4,0	2,0	1,5	2,0	3,0	10,0	4,0
Obj. číslo	ED5002	ED5005	ED5008	ED5009	ED5022	ED5023	ED5024	ED5025	ED5026	ED5027	ED5028	ED5029	ED5030
Cena Kč	626,-	626,-	626,-	626,-	626,-	626,-	626,-	626,-	626,-	626,-	626,-	626,-	945,-

Dřík 104 HP $\varnothing 2,35$ mm

STARGLOSS

Diamantové nástroje určené zejména pro opracování moderních typů keramiky a celokeramických systémů (zirkonové keramiky). Úprava tvaru, vyhlazení a leštění na vysoký lesk bez lešticí pasty nevyžaduje další pálení na lesk. Nejhrubší modré nástroje se používají k úpravě tvaru, střední růžové k vyhlazení povrchu a nejjemnější šedé k leštění na vysoký lesk.

StarGloss EDR10xx

639 Kč

StarGloss EDR15xx

829 Kč

StarGloss EDR20xx

219 Kč




EDR1020



EDR1030



EDR1040

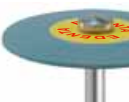

EDR1520



EDR1530



EDR1540



EDR2020



EDR2030



EDR2040

ACRYLIC

Acrylic různé
tvary a hrubosti

59 Kč

Lešticí nástroje s dlouhou životností pro úpravu povrchu snímácích náhrad bez použití tvrdokovových fréz. Tmavě modré jsou určeny pro úpravu tvaru pryskyřice, světle modré pro vyhlazení povrchu. Doporučené otáčky 10 000–15 000 ot./min.



ED0631



ED0632



ED0634



ED0636



ED0641



ED0642



ED0644



ED0646

SEPARAČNÍ DISKY

Disky 7006, 7007 a 7008 jsou velmi flexibilní vyztužené řezací disky a mají vysokou řezací schopnost. Dlouhou životnost umožňuje nový vazebný matrix, který též redukuje riziko prasknutí disku. Disky lze použít pro řezání a disk tloušťky 1 mm i pro broušení. Vyztužený disk 7005 je určen pro řezání vtokových kanálů.

Separační disky



Balení 10 ks

Ke každému balení
mandrel ED4007

ZDARMA

Síla mm	0,20	0,50	1,00	1,00
Průměr ø mm	22	40	40	40
Obj. č.	ED7006	ED7007	ED7008	ED7005
Doporučené otáčky ot./min	20 000	10 000	10 000	10 000
Cena Kč	549,-	639,-	779,-	599,-

KARTÁČE TAURUS

Univerzální kartáče pro vysoký lesk všech dentálních slitin, kompozitů a keramiky. Dodávají se ve čtyřech tvrdostech a třech průměrech (14.5, 17.5 a 19 mm). Doporučené otáčky: 16 000 ot./min.

Kartáče Taurus
různých hrubostí a průměrů

29 Kč



Materiál	koňské žíně	koňské žíně	kozí chlup	kozí chlup
Tvrдость	velmi tvrdý	tvrdý	střední	měkký

Q BASIC / Q PROFI

Q Basic – nový univerzální bezuhlíkový mikromotor Schick pro běžné laboratorní práce. Dodává se v kolenním, nožním a stolním provedení. Krouticí moment mikromotoru je 6,7 Ncm, rozsah otáček lze nastavit v rozmezí 1 000–40 000 ot./min.

Q Profi – inovovaný jednoduchý bezuhlíkový mikromotor Schick pro nejnáročnější laboratorní práce. Dodává se v kolenním a nožním provedení. Krouticí moment je nyní 8,0 Ncm, rozsah otáček lze nastavit u nožní verze v rozmezí 1 000–40 000 ot./min, u kolenní verze v rozmezí 1 000–50 000 ot./min.

Q Basic kolenní,
nožní nebo stolní

29.990 Kč

Q Profi kolenní
nebo nožní

34.990 Kč

(Ceny nelze kombinovat
s dalšími slevami)



SCHICK QUBE

Nové bezuhlíkové mikromotory Schick jsou k dispozici ve třech variantách. Nejjednodušší QUBE je určen pro jednoduché laboratorní práce, QUBE Plus je konstruován pro všechny běžné práce a pro práce vyžadující vysoké otáčky a sílu motoru je určen QUBE Premium. Mikromotory se standardně dodávají s krátkým násadecem, na přání je možné objednat i klasický dlouhý násadec. Dynamický pedál nebo pedál Start-Stop pro stolní provedení je dodáván jako zvláštní příslušenství. K motorům lze připojit modelovací nůž na vosk.

QUBE
kolenní, stolní nebo nožní

38.990 Kč

QUBE Plus
kolenní, stolní nebo nožní

43.990 Kč

QUBE Premium
kolenní, stolní nebo nožní

47.990 Kč



INTERAKCE

DUOSTAR

Kombinovaný pískovač pro hrubé pískování v komoře s oběhem písku a jemné pískování pomocí dvou trysek s pískem na jedno použití. V náсадkách trysek je integrováno LED osvětlení, pracovní pole je tak ideálně osvětleno přímo a beze stínů. V pevné tryse je zaměřovací paprsek, pomocí něhož lze práci přesně umístit a pískování je tak velmi rychlé a efektivní. LED technologie navíc umožňuje detekovat během pískování praskliny v keramice, a tak předejít případným pozdějším reklamám. Duostar Plus se dodává včetně odsávání s víceúrovňovou filtrací Filter Module H. Duostar Z je vybaven přípojkou pro externí odsávání.



Duostar Z **59.990 Kč**

Duostar Plus **79.990 Kč**



KOROSTAR

Oběhový pískovač pro hrubé opískování odlitků od zbytků zatmelovací hmoty apod. Ergonomický design umožňuje pohodlnou práci, prostorná komora je osvětlena LED osvětlením. Díky použitým materiálům je pískovač nenáročný na údržbu, tryska zaručuje optimální poměr mísení písku se vzduchem. Korostar Plus se dodává včetně odsávání s víceúrovňovou filtrací Filter Module H. Korostar Z je stejný přístroj dodávaný bez odsávání a je vybaven přípojkou pro odsávání externí.

Korostar Z **39.990 Kč**

Korostar Plus **69.990 Kč**

INTERALOX

Bílý čistý aluminiumoxid je velmi tvrdý, používá se na pískování odlitků z drahokovových i náhradních slitin. Dodává se v zrnitostech 250, 150, 110 a 50 μm .



Interlox 7 kg **599 Kč**

Interlox 28 kg **1.999 Kč**

ODSÁVÁNÍ SMARTAIR EVO

SMARTair EVO je výkonné odsávací zařízení pro všechny typy laboratorních stolů. SMARTair EVO mobilní je univerzální odsávání pro použití v zubní laboratoři. Reguluje sání ve 4 výkonových stupních. Filtry zachytí 99,9 % jemného prachu, filtr z aktivního uhlí pohlcuje pachy a výpary vzniklé například při opracování pryskyřic.



SMARTair EVO **34.990 Kč**



SMARTair EVO mobilní **34.990 Kč**

MIKROSKOP ASM

Mikroskop s ergonomickým designem je určen pro práci v zubní laboratoři. Optická soustava mikroskopu se vyznačuje HD rozlišením, vysokou hloubkou ostrosti, širokým úhlem záběru a optimální pracovní vzdáleností, což umožňuje přesnou a pohodlnou práci. Mikroskop je upevněn k podstavci nebo k pantografickému rameni, je vybaven ochrannými čočkami, které zabraňují vniknutí prachu a nečistot do optické soustavy. Osvětlení pracovního pole zajišťuje kruhové světlo se 77 LED diodami, dodává se s dvoustupňovým zvětšením 10 $\times$ / 20 $\times$ nebo zoom 7 $\times$ –45 $\times$.



Mikroskop ASM s ramenem se zvětšením zoom **26.990 Kč**

Mikroskop ASM s podstavcem se zvětšením 10/20 $\times$ **19.990 Kč**

STEAMER X3

Parní čistička s jednoduchým ovládáním je vyrobena z odolných dílů. Nádrž na vodu o obsahu 3,7 l i vnější plášť přístroje jsou vyrobeny z nerezujícího hliníku. Snadné plnění bez nutnosti použití nálevky. Čistička je vybavena vodoznakem.



Steamer X3

32.990 Kč

(Ceny nelze kombinovat s dalšími slevami)

PARNÍ ČISTIČKA EV1

Čistička pro čištění mokrou párou za tlaku 4,5 bar. Nerezová nádrž o obsahu 4,5 l se plní manuálně. Pokles vody je indikován varovnou LED diodou.



Parní čistička EV1

25.990 Kč

ELTROPOL 300

Nový typ galvanické leštičky pro dva skelety s možností nastavení času leštění pro různé velké práce. Ovládací panel s přehledným displejem, bezpečné a snadné vypouštění nádrže. Leštička se dodává s katodou pro hluboké patro.



Eltropol 300

65.990 Kč



Elektrolyt MG
1 litr

399 Kč

ELEKTROLYT MG

Roztok pro elektrolytické leštění odlitků chromkobaltových slitin.

ODKALOVAČ SÁDRY

Odkalovač sádry k filtraci odpadní vody s kruhovým půdorysem. Ve čtyřkomorovém systému s různě vysokými přepážkami dochází k bezpečnému zachycení pevných částic. Průměr odkalovače v nejširším místě je 34 cm, výška 30 cm, spodní hrana odtoku je ve výšce 21 cm a vnější průměr odtokové trubky je 5 cm. Odkalovač se dodává s pevně uzavíratelným víkem a hadicemi pro přítok a odtok.

Odkalovač
sádry

9.799 Kč



DENTASUN MD

Plinospektrální svítidlo zaručující světlo vysoké intenzity a mimořádné kvality. Na objednávku je možno dodat svítidla s vyšším výkonem, případně včetně stmívání a dálkového ovládání.



Dentasun MD
4 × 54 W

13.990 Kč

Dentasun MD
6 × 54 W

25.990 Kč

EXTRACENY

Obj. č.	Název	Výrobce	Původní cena	ExtraCena
AM116170	Smartbox X2	Amann	86.382,-	47.999,-
AM176700	Giroform + základní sada materiálu ZDARMA	Amann	70.573,-	4.899,-
AM760116	Ceramill blanks ZI 31, 6 ks	Amann	8.344,-	2.999,-
BG16274	Motova – nádoba M, 1200ml	Bego	11.629,-	4.499,-
BG52400	Bego manžeta velká, 4 ks	Bego	1.442,-	999,-
BG52800	Flexi-Serc sada	Bego	3.694,-	1.799,-
BG51105	Bellatherm, 4,5 kg (exp. 1/2017)	Bego	1.373,-	999,-
BR43001637	Posifix – fixační vosk, 50g	Bredent	1.222,-	899,-
BTH90714R4	Habras disky 14 mm, zelené, 4 ks	Becht	214,-	139,-
DE4813232	Conalor prášek B, 15g (exp. 1/2017)	SpofaDental	104,-	89,-
ER581254	Fólie Erkoflex 4,0/120 mm, temně černá, 5 ks	Erkodent	726,-	499,-
ER531101	UZF fólie 0,1/120 mm, červená, 100 ks	Erkodent	756,-	379,-
ER725090	Cervikální vosk fialový, 50g (exp. 1/2017)	Erkodent	457,-	299,-
GC005189	Gradia Dentin A2, 2,9 ml (exp. 12/2016)	GC	1.580,-	999,-
HK64707815	Palapress prášek růžový opákní, 1000g (exp. 9/2016)	H. Kulzer	3.583,-	899,-
HK64707890	Palapress Vario prášek růžový op., 1000g (exp. 10/2016)	H. Kulzer	3.583,-	1.599,-
HSC519-17	Pinzeta na korunky s diamantovými hroty 170 mm	Hammacher	2.363,-	1.599,-
HSL247-10	Měřítka Iwanson na vosk 100 mm	Hammacher	711,-	379,-
HSL519-18	Štípací kleště převodové Fantastico	Hammacher	1.541,-	999,-
IN1596	Interacryl Cast prášek odstín 16, 1000g (exp. 12/2016)	Interdent	1.797,-	999,-
IV531827	Chromasit Incisal S4, 10g (exp. 10/2016)	Ivoclar	1.649,-	899,-
IV572951	Adoro Dentin 320/5B, 3g (exp. 2/2017)	Ivoclar	683,-	499,-
IV572963	Adoro Chromascop Schneide 2, 3g (exp. 3/2017)	Ivoclar	683,-	549,-
IV628587	Vzorník Ivoclar s bleach odstíny	Ivoclar	1.431,-	1.199,-
IX36581	Stojánek na lící kelímky nerezový Ø42 mm	SkloPlast	1.703,-	1.349,-
KE35169/70/71	Ultra Waxer – koncovka bobří ocas / 7 malá / 7 velká	KerrLab	2.315,-	1.699,-
ME114520100	Pinzeta laboratorní zkřížená 15,3 cm	Medin	329,-	259,-
ME155521422	Modelovací nástroj tvar 3	Medin	385,-	299,-
PO7881	Kotouč 85 mm kůže	Polident	231,-	149,-
RE1105-0300	Jacket-Grip	Renfert	1.543,-	999,-
RE500.0000	GEO-Pontics bloky na keramiku	Renfert	2.760,-	1.799,-
SI801SD	Bruska na sádku s diamantovým diskem – suchá	Silfradent	39.136,-	18.999,-
SL01000MVS	Vibrační nástroj s univerzální koncovkou	Smile Line	4.382,-	2.299,-
SL1500/1	Podložka Hold-on	Smile Line	726,-	459,-
SL4000R	Nástroj SL vibrační koncovka	Smile Line	559,-	369,-
SL4003	Sada nástrojů na porcelán	Smile Line	3.592,-	2.299,-
VI0094/16	Akzent Stains 16, 3g	Vita	370,-	199,-
VI0086/ES12	Akzent Plus Effect Stains pasta ES12, 4g	Vita	532,-	359,-
VI0089/BS02	Akzent Plus Body Spray BS02, 75 ml (exp. 9/2016)	Vita	2.556,-	499,-
VIB5051075	Akzent Plus Glaze spray, 75 ml	Vita	2.039,-	1.399,-
VIB5052075	Akzent Plus Glaze LT spray, 75 ml	Vita	2.169,-	1.399,-
VIHP400	In-Ceram Alumina Powder, 400g	Vita	8.629,-	3.599,-
VI7765/2L1.5	VM LC Base Dentine 2L1.5, 4g (exp. 11/2016)	Vita	793,-	499,-
VIHZ23/24	In-Ceram Zirconia Glass Powder Z23 / Z24, 25g	Vita	5.211,-	2.999,-
WA166998	Zásobník na sádku stolní	Wassermann	74.375,-	34.999,-
ZO9502	Deskové světlo DentaSun Classic 2 × 54 W	Dentasun	12.240,-	8.999,-

Termín	Téma	Výrobce	Místo	Přednášející	Cena Kč
15.9.–16.9.	Tepelné tvarování fólií Praktické využití techniky vakuově tepelného tvarování fólií (individuální lžice, sportovní chrániče chrupu, dlahy, nosiče bělicích přípravků, provizorní můstky atd.)	ERKODENT	Ostrava	Tom Arslanian	5.500,-
22.9.–23.9.	Kovokeramika – mistrovský Žádná barva není problém! Renato Carretti – mistr zubní technik ze Švýcarska v Praze opět ukáže své umění. Individuální vrstvení keramických hmot VITA VM13 a VM9. Využití hmot VITA Interno v estetice frontálních zubů apod.	VITA	Praha	Renato Carretti, Švýcarsko	*15.000,-
29.9.	VITA keramika VM Koncept – POWER KURZ Jednodenní individuální kurz – vrstvení keramických hmot VITA VM9, použití Professional Kitu, VITA Akzentu Plus a Interna. Řešení barevně náročnějších rekonstrukcí ve frontálním úseku.	VITA	Ostrava	Čeněk Neruda	2.880,-
30.9.	SIRONA inEos X5 a CEREC inLab CAD 15 a CAM 15.1 Seznámení se s programem inLab CAD/CAM a scannerem inEos X5, fréza MCXL a MCX5 open system. STL formáty. Praktická ukázka frézování. Ordinační scanner Apollo.	SIRONA	Praha	Tom Arslanian	700,-
10.10.	Estetika Signum Matrix Výběr správného kompozitu, Estetika Signum Matrix, Signum Ceramis, Signum bonding systém. Zhotovení celokompozitní korunky, inlay nebo onlay. V ceně školení je občerstvení a oběd.: Nástroje a brousky s sebou.	H. KULZER	Praha	Radim Pištěk	2.800,-
13.10.–14.10.	VM Koncept – perfektní kombinace materiálů Individuální vrstvení keramických hmot VITA VM13, použití Professional Kitu, VITA Akzentu Plus a Interna. Řešení barevně náročnějších rekonstrukcí ve frontálním úseku.	VITA	Ostrava	Čeněk Neruda	5.900,-
14.10.–15.10.	"Růžová estetika" u snímatelných náhrad Jedná se o teoretické i praktické školení pro techniky, kterým záleží na detailu! Viktor Fürgut mistr zubní technik patří mezi špičku ve snímatelné protetice. Předvede správnou modelaci a probarvení pomocí pryskyřic Candulor. Každý si tuto techniku prakticky vyzkouší na připravených modelech a osvojí si konečnou úpravu. V ceně školení je občerstvení, oběd a večerní raut s překvapením.	VITA	Praha	Viktor Fürgut, Německo	15.000,-
17.10.–18.10.	Tepelné tvarování fólií Praktické využití techniky vakuově tepelného tvarování fólií (individuální lžice, sportovní chrániče chrupu, dlahy, nosiče bělicích přípravků, provizorní můstky atd.)	ERKODENT	Praha	Tom Arslanian	5.500,-
24.10.	VITA VM LC a VITA VM LC flow Jeden fazetovací kompozitní materiál, dvě konzistence, nové možnosti v konceptu VM.	VITA	Ostrava	Čeněk Neruda	2.700,-
24.10.–25.10.	HeraCeram, HeraCeram Zirkonia – pokročilí S HeraCeram keramikou lze dosáhnout estetické náhrady, které uspokojí všechny potřeby v jakékoli situaci – věrné odstíny barev, od A-D odstínů pro každodenní práci, až po špičkové, luxusní komplexní restaurování se zářivou dynamikou světla. Všechny keramické materiály HeraCeram jsou zpracovávány stejným jednoduchým způsobem pro všechny konstrukční materiály. Kurz provede účastníky technikou vrstvení pro každodenní využití i individuální práci. Práce s živými barvami materiálu, který ještě navíc obsahuje stabilizovanou strukturu leucitu, je nekomplikovaná a přináší fantastické výsledky. Přijďte si vyzkoušet HeraCeram keramiku na zirkoniové konstrukce! Tento kurz je vhodný pro techniky, kteří již pracují s keramikou HeraCeram. V ceně školení je občerstvení a oběd. Nástroje a brousky s sebou.	H. KULZER	Praha	Jakub Hošek	6.500,-
26.10.–27.10.	Snímací protetika Teorie výběru zubů podle fyziologie obličeje, registrace mezičelistních vztahů, zastavení modelů do artikulátoru, stavění zubů podle ověřených pravidel, anatomická modelace náhrady měkkých tkání, základní pravidla pro správnou adhezi protézy.	VITA	Ostrava	Tom Arslanian	6.500,-
31.10.	GC Initial – univerzální keramický systém Initial LiSi – nová, vysoce estetická živčinná keramika, která je přizpůsobená světelné dynamice lithium disilikátových konstrukcí.	GC	Plzeň	Krešimir Varda	1.500,-
3.11.–4.11.	VM Koncept – perfektní kombinace materiálů Individuální vrstvení keramických hmot VITA VM13, použití Professional Kitu, VITA Akzentu Plus a Interna. Řešení barevně náročnějších rekonstrukcí ve frontálním úseku.	VITA	Praha	Čeněk Neruda	6.700,-
7.11.–9.11.	Kovokeramika – základní Základní vrstvení keramických hmot z materiálu VM13 nebo VMK Master. Seznámení s teorií (modelace, opracování, vhodné slitiny) i praxí (dvě korunky a tříčlenný můstek).	VITA	Praha	Michal Nový	6.000,-
11.11.	VITA VM LC a VITA VM LC flow Jeden fazetovací kompozitní materiál, dvě konzistence, nové možnosti v konceptu VM.	VITA	Praha	Čeněk Neruda	2.000,-
17.11.–19.11.	Skelety podle systému Úsporná a přesná metoda zhotovení skeletů podle SILADENT systému. Návrh konstrukce a vyhodnocení na paralelometru, dublování, lití a opracování skeletové náhrady.	SILADENT	Praha	Tom Arslanian	7.500,-
18.11.	VITA keramika VM Koncept – POWER KURZ Jednodenní individuální kurz – vrstvení keramických hmot VITA VMK Master, použití Professional Kitu, VITA Akzentu Plus a Interna. Řešení barevně náročnějších rekonstrukcí ve frontálním úseku.	VITA	Ostrava	Čeněk Neruda	2.880,-
23.11.	VITA keramika VM Koncept – POWER KURZ Jednodenní individuální kurz – vrstvení keramických hmot VITA VM13, použití Professional Kitu, VITA Akzentu Plus a Interna. Řešení barevně náročnějších rekonstrukcí ve frontálním úseku.	VITA	Ostrava	Čeněk Neruda	2.880,-
28.11.	SIRONA inEos X5 a CEREC inLab CAD 15 a CAM 15.1 Seznámení se s programem inLab CAD/CAM a scannerem inEos X5, fréza MCXL a MCX5 open system. STL formáty. Praktická ukázka frézování. Ordinační scanner Apollo.	SIRONA	Praha	Tom Arslanian	700,-
3 dny (září–listopad) termín bude určen	Zásuvné spoje SphäroLock – hybridní náhrada Zhotovení snímatelné náhrady z licí pryskyřice kotvené dvěma aktivovatelnými kulovými retenčními prvky.	ZL MICRODENT	Milevsko	Milan Kořánek	8.900,-
2 dny (září–listopad) termín bude určen	Protetika a implantáty Orientace v názvosloví, rozdělení jednotlivých konstrukčních dílů, zhotovení modelu včetně gingivální masky, zhotovení kovové konstrukce nesené implantáty.	INTERDENT	Milevsko	Milan Kořánek	11.640,-
3 dny (září–listopad) termín bude určen	Zásuvné spoje AcryLock Zhotovení konstrukce fixní a snímatelné části protetické náhrady, při použití dvou variant zásuvných spojů AcryLock.	ZL MICRODENT	Milevsko	Milan Kořánek	8.300,-
2 dny (září–listopad) termín bude určen	Tepelné tvarování fólií Praktické využití techniky vakuově tepelného tvarování fólií v zubní laboratoři (individuální lžice, chrániče chrupu, dlahy, nosiče bělicích přípravků, provizorní můstky atd.)	ERKODENT	Milevsko	Milan Kořánek	6.500,-
3 dny (září–listopad) termín bude určen	Skelety Vyhodnocení modelu s použitím paralelometru, návrh vhodných kotevních prvků, statika a geometrie budoucí skeletové náhrady. Zhotovení deskové náhrady se třemi kotevními prvky.	BEGO	Milevsko	Milan Kořánek	8.900,-
2 dny (září–listopad) termín bude určen	Teleskopická náhrada Teleskopická náhrada – jednoduše bez stresu. Zhotovení primárních a sekundárních dílů teleskopické náhrady z náhradního kovu s použitím speciální frickní fólie Usig.	ERKODENT	Milevsko	Milan Kořánek	11.990,-

* 50% ceny hradí INTERDENT a výrobce.

Snadné tavení, přesné lití

Dentální kovy INTERDENT

I-Bond NF

I-Bond 02

I-GW

I-MG

I-MG FH

I-MG HE

I-MG EKO



PRAGODENT 2016 – ano či ne?

Vážení, dovolujeme si Vás informovat o nepřehledné situaci kolem výše uvedené výstavy:

Po konzultacích s odbornou veřejností se většina dentálních firem shodla na dvouletém cyklu výstav, a to vždy po IDS. S tímto konceptem původně souhlasil i organizátor Pragodentu – Incheba, ale jako vždy v Čechách zvítězily partikulární zájmy, a tak se letos Pragodent uskuteční, i když vystavovatelů bude podstatně méně než v minulých letech.

Pro případné návštěvníky nebudou k dispozici kromě naší ani expozice firem Dentamed, HuFa, Soral, Fénix, JPS, Schafferová, Krbec, Dentamechanik, Dent Unit, ale ani stánky tradičních vystavovatelů z řad výrobců 3M, Heraeus Kulzer, GC, Vita, Ivoclar Vivadent, Medin, KaVo, SpofaDental, Kerr, přestože některá z těchto jmen Incheba i přes nesouhlas firem uvádí v seznamu „nepřímých“ vystavovatelů.