



OLI-PRODUCTS

DENTAL OFFER

OLI

AKCIA

-30%

na všetky produkty OliDent

Uvedené ceny sú pred zľavou

German Quality
Calidad Alemana
Niemiecka Jakość





OLIDENT
INNOVATION


OLI-PRODUCTS

DENTAL OFFER



Distribútor pre SR:
Albaco-DENT s.r.o.
Škultétyho 1, 08001 Prešov
Tel. 0905 650 725
051/ 7764191
Email: albacadent@albacadent.sk
www.albacadent.sk

Nemecká kvalita super cena

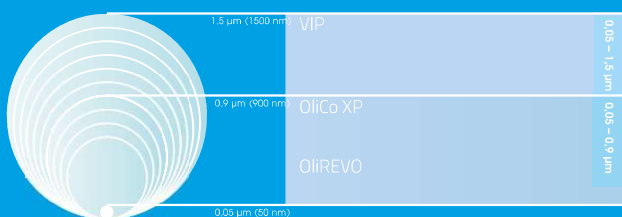

Porovnanie OliDent kompozitných výplní

IndiCatiOns	COM OsiTe	OliREVO	OliCo X	VI esthetic	VI osterior	OliFlow	OliFlow se
Class I		•	•	•	•	•	•
Class II		•	•	•	•	•	•
Class III		•	•	•	•	•	•
Class IV		•	•	•	•	•	•
Class V		•	•	•	•	•	•
Minimally invasive techniques						•	•
Primary teeth fillings		•	•	•	•	•	•
Direct composite veneers		•	•	•	•	•	•
Inlays, onlays and indirect composite veneers		•	•	•	•	•	•
Baseliner						•	•
sealing pits and fissures						•	•

• Hlavné použitie • Možné použitie

OliREVO **Revolučný nanomateriál, ktorý si zamilujete**



OliREVO je prvý nano-hybridný kompozit na trhu, ktorý je ľahko tvarovateľný a pohodlný na používanie. Jeho konzistencia sa nazýva "WAX-like" (ako vosk), ktorá zaručuje vysoko estetickú výplň s mechanickými vlastnosťami, zaručujúcimi dlhodobé a spoľahlivé výsledky.




WAX-like - materiál je po vytlačení tvrdý a počas práce má konzistenciu mäkkého vosku. Perfektné si udržuje namodelovaný tvar a po vyleštení si zachováva dlhodobú estetiku

ODOLNOSŤ VOČI ABRAZII

Štúdie na povrchu zhotovenej výplne vykazujú veľmi nízke abrazívne opotrebenie. **OliREVO** dosahuje jeden z najlepších výsledkov medzi jeho konkurentmi. Po 200 000 cykloch vykazuje opotrebenie povrchu len 38 µm. To dokazuje, že **OliREVO** výplne sú mimoriadne trvácne a taktiež bezpečné pre opozitné zuby.

DLHODOBÁ A ESTETICKÁ VÝPLŇ

Vďaka výnimočnej odolnosti voči tlaku **OliREVO** znáša vysoké zaťaženie, ako na okluzálnom, tak na incizálnom povrchu. Navyše **OliREVO** má nezvyčajne nízku rozptornosť vo vode - viac ako 7x nižšia, ako je štandard ISO! Pre toto nízke opotrebenie je **OliREVO** perfektná voľba pre dlhodobé a vysoko-estetické výplne.

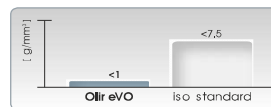

Obj. č. 4g Striekačka	
OL311 - A1	OL322 - OA3
OL312 - A2	OL394 - BL
OL313 - A3	OL316 - B1
OL314 - A3.5	OL317 - B2
OL328 - A4	OL395 - Window
OL315 - OA2	OL321 - INCISAL

Balenie	Cena
4g striekačka	39,90 €

Obj. č. Kapsule	
OL931 - A1	OL934 - A3.5
OL932 - A2	OL935 - OA2
OL933 - A3	

Balenie	Cena
20 x 0,3g kapsule	79,00 €

Obj. č. Výhodné balenie	
OL376 - Vlastný výber farieb	
Balenie	Cena
6 x 4g striekačka	234,00 €

Obj. č. Výhodné balenie + BOND	
OL370 - Vlastný výber farieb	
Balenie	Cena
8 x 4g striekačka 5ml OliEtch BOND	368,00 €

Podobné produkty:
Venus Diamond - Heraeus Kulzer
IPS Empress Direct - Ivoclar Vivadent
Filtek Supreme XTE - 3M Espe
Amaris - VOCO

Obj. č.	
OL011XP - A1	OL025XP - BLE
OL012XP - A2	OL016XP - B1
OL013XP - A3	OL017XP - B2
OL014XP - A3.5	OL018XP - C2
OL015XP - OA2	OL019XP - D2
OL022XP - OA3	OL020XP - D3
	OL021XP - INCISAL

Balenie	Cena
5g striekačka	31 €

Obj. č.	
OL076XP - Výber vlastných farieb	
Balenie	Cena
8 x 5g striekačka	239 €

Obj. č.	
OL078 - Výber vlastných farieb + BOND	
Balenie	Cena
8 x 5g 5ml OliBOND	267 €

Podobné produkty:
Ceram X Mono - Dentsply
Tetric EvoCeram - Ivoclar Vivadent
Grandio SO - VOCO

KOMPOZITNÉ VÝPLNE

Testovacie balenie



OliCo XP bal. 5 x 1g
len za **19,90 €**

OliREVO bal. 4 x 1g
len za **19,90 €**

Na testovacie balenia sa nevzťahujú žiadne zľavy.

OliCo XP

OliCo XP je technologicky vylepšená generácia kompozitu OliCo, ktorá je na trhu už dlhú dobu. Spája excelentnú estetiku s výbornými a bezchybnými mechanickými vlastnosťami, ktoré určite ocení každý používateľ. **OliCo XP** je ideálny materiál do frontálnej aj distálnej oblasti.




OliCo - an eXPERT
in nano-ceramic technology



Nový OliCo XP má viac nanočastíc v obsahu plniva než OliCo

Viac ako "NANO" výplň

Nový OliCo XP má oveľa viac nanočastíc v objeme. Vylepšené zloženie pomohlo získať materiál oveľa lepšie parametre v sile, pri nižšej kontrakcii pri polymerizácii. Výplne OliCo XP sú odolnejšie voči tlaku a oderu.

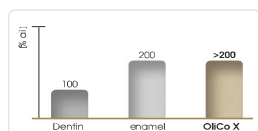


Excelentná číselnosť na radiografe

Veľký rozsah výhod a aplikácií

- odolnosť voči abrazii
- nízka kontrakcia
- "chameleon efekt" pre excelentnú estetiku
- ľahké leštenie a dlhodobo udržateľný lesk
- nelepivý efekt zabezpečuje ľahkú tvarovateľnosť
- široká škála použitia

VIP esthetic

Už dlhé roky je na trhu **VIP esthetic** obľúbený hybridný kompozit s mikročasticami. V nedávnom výskume **VIP esthetic** vykazuje veľmi nízku mieru absorpcie vody. Všeobecné normy ISO pre kompozitné materiály vyžadujú index nižší ako 40 µg/mm³, hodnoty **VIP esthetic** vykazujú hodnoty 4 krát nižšie, ako je táto norma! Z tohto dôvodu vykazujú výplne VIP vynikajúcu farebnú stabilitu a dlhodobú mechanickú trvácnosť.

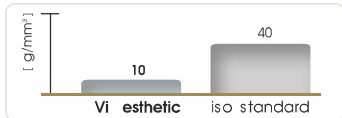

Absorpcia vody VIP esthetic je 4-krát nižšia ako norma ISO.



Clinical pictures by courtesy of Dr. Dominik Morawski, Poľsko

Podobné produkty:
Filtek Z250 - 3M Espe
Gratia Direct - GC

Obj. č.	Balenie	Cena
OL211 - A1	5g striekačka	19,60 €
OL212 - A2		
OL213 - A3		
OL214 - A3.5		
OL215 - OA2		
OL217 - B2		
Obj. č.	Balenie	Cena
OL276 - Výber vlastných farieb	8 x 5g striekačky	155,00 €
Obj. č.	Balenie	Cena
OL217 - Výber vlastných farieb	12 x 5g striekačky	260,00 €

VIP Posterior

VIP Posterior je špeciálne upravená verzia VIP esthetic, určená na výplne vo veľmi exponovaných miestach, ktoré sú obzvlášť vystavené okluzálnym silám. Obsah častíc plniva je zvýšený (hmotnosť: 84%), aby sa získala vyššia tvrdosť materiálu, ale bez straty jeho vynikajúcej konzistencie. Zvýšený obsah častíc plniva zabezpečuje tiež výrazne nižšie zmrštenie pri polymerizácii, čím sa minimalizuje stresový efekt kavity.



Clinical pictures by courtesy of Dr. Tomasz Świątek, Poľsko

Obj. č.	Balenie	Cena
OL252 - A2	5g striekačka	22,70 €
OL253 - A3		
OL254 - A3.5		

Podobné produkty:
Gratia Direct Posterior - GC

OliFlow SE

• Pevná väzba na dentín a sklovinu bez leptania a bondovania!
 OliFlow SE je samoadhezívny svetlom tuhnutí zatekavý kompozit pre frontálne a obmedzené distálne použitie. Optimálne zatekavé vlastnosti umožňujú ľahkú aplikáciu materiálu.



Obj. č.	Balenie	Cena
OL058 - A2	2ml striekačka 3 aplikčné ihly	37,80 €

Podobné produkty:
Constic - DMG
Vertise Flow - Kerr
Fusio Liquid Dentin - Pentron

OliFlow

Osvedčený a profesionálmi uznávaný univerzálny tekutý mikro-hybridný kompozit. Navrhnutý pre malé kavity, pečatenie fisúr aj ako podložkový materiál. Ideálna konzistencia zaisťuje, že OliFlow sa perfektne prispôbi kavitě a zostáva stabilný na preparovanom povrchu.



- Vyžaduje bežný spôsob spojovania skloviny a dentínu.
- Ochrana pulpy pred mechanickým a tepelným účinkom



Obj. č.	Balenie	Cena
OL043 - A1	2ml striekačka 3 aplikčné ihly	17,40 €
OL042 - A2		
OL040 - A3		
OL046 - A3.5		

Podobné produkty:
Filtek Ultimate XT Flow - 3M Espe
Grandio Flow - VOCO
Grandia DIRECT Flo - GC

OliNano SEAL

Nano MIX Silicone Protector

OliNano SEAL je inovatívny protektor "lak", na báze patentovaného silikón polyméru, ktorý poskytuje vynikajúcu adhéziu na sklovinu a dentín bez predchádzajúceho leptania. Inovatívna formula OliNano SEAL zostáva na povrchu zubov cca. 12 mesiacov (iné dostupné produkty max 2-3 mesiace).



- Silicone polymer:**
 - poskytuje excelentnú väzbu na sklovinu a dentín
 - je transparentný - nezanecháva škvrny na zuboch
- NANO-fluoropapatite:**
 - utesňuje mikrotrhliny
 - preniká do dentínových kanálikov a uzatvára ich
- NANO-calcium fluoride:**
 - zásoba fluoridov riadená pH zmenami
 - poskytuje postupné a dlhodobé uvoľňovanie fluoridov
- Amine fluoride OliFlur:**
 - poskytuje okamžité uvoľňovanie fluoridov
 - urýchľuje prirodzenú remineralizáciu

BEZ LEPTANIA! BEZ VYTVRDZOVANIA!

OliNano SEAL je perfektný na viacero použití:

- profylaxia u detí a dospelých, ako aj u pacientov s ortodontickým aparátom
- ošetrovanie zubov po profesionálnom čistení
- ochrana zubov po profesionálnom alebo domácom bielení
- odstránenie citlivosti zubov
- remineralizácia zubov a zacelenie mikrotrhliniek na sklovinu
- dočasné utesnenie výplní

Obj. č.	Balenie	Cena
OL008	5ml fľaša 20 apl. štelec 1 miešacia podložka	75,20 €

OliBOND OliActivator

Svetlom tuhnutí Prime/Bond adhezívny systém pre svetlom tuhnuce kompozitné materiály. Zabezpečuje pevnú väzbu k dentínu a sklovine. Ak skombinujete OliBOND s OliActivator dostanete duálne tuhnuce adhézivum.

- VÝHODY:**
- Dve polymerizačné techniky v jednom adhezívnom systéme
 - Vhodný pre všetky typy kompozitných materiálov
 - Hydrofilné vlastnosti ho robia ideálnym pre Wet-Bonding techniku

Kvalita vs Cena - Univerzálnosť a spoľahlivosť v kombinácii s prijateľnou cenou sú hlavné dôvody, prečo sa OliBOND stal jedným z najlepšie predávaných adhezívom na trhu.

Obj. č.	Balenie	Cena
OL001 OliBOND	5ml flastička	27,80 €

Obj. č.	Balenie	Cena
OL002 Oli Activator	3ml flastička	29,10 €

Podobné produkty:
Prime&BondNT - Dentsply
Heliobond - Ivoclar Vivadent


OliEtch BOND

Jednozložkové, jednovrstvové adhézivum 7. generácie. Navrhnuté pre zjednodušenie pracovného postupu, pri dosiahnutí excelentnej kvality a vysokej sile väzby. Jednoduchosť techniky eliminuje chyby v pracovnom postupe.


Jeden z najsilnejších

Medzi najpopulárnejšími samo-adhezívami OliEtch BOND vyniká s jeho výbornými adhezívnymi väzbami. Len jedna vrstva OliEtch BOND je postačujúca na dosiahnutie pevnej a dlhotrvajúcej väzby k dentínu a sklovine.

the bonding strength to enamel (mPa)*

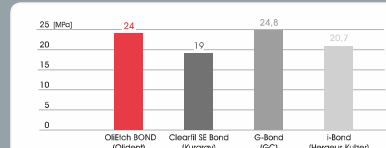

the bonding strength to dentin (mPa)*

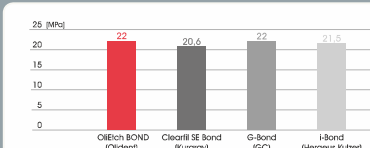

Obj. č.	Balenie	Cena
OL003E	5ml flastička	56,60 €

Podobné produkty:
XP Bond - Dentsply
G-Bond - GC
OptiBond All in one - Kerr

* Internal research conducted by the manufacturer, Germany, 2011.



OliCem SE

Samoleptací kompozitný cement

Samoadhézný duálne tuhúci kompozitný materiál pre finálne cementovanie korúnok, mostíkov, inlay, onlay a čapov. Poskytuje silnú väzbu na sklovinu, dentín, zirkón - 16MP, keramiku, kompozity, titán a kovy.



Obrazok z mikroskopu zozorňuje excelentnú integritu na okrajoch medzi OliCem SE, čapom a dentínom.



Vysoká prílnavosť bez bondu a leptania

Celkový pracovný postup cementácie si vyžaduje len niekoľko krokov bez rizika leptania dentínu a citlivosti.

Produkt je samoneutralizujúci - s počiatočne nízkym pH, ktoré po niekoľkých hodinách po aplikácii stúpa na pH 5,5. Zvýšenie pH zabraňuje citlivosti po cementácii.

Dokonálna rekonštrukcia a predvídateľná práca


Jemné zloženie - 12μm - poskytuje presnú cementáciu, čo eliminuje jeho expanziu a zmrštenie, tým je zabezpečená vynikajúca integrita na okrajoch. Systém duálneho vytvrdzovania umožňuje predbežné vytvrdenie a jednoduché odstránenie prebytku v počiatočnej fáze.

Vynikajúca farebná stabilita a prirodzená fluorescence


Preukázaná stabilita farieb zaručuje dlhotrvajúci estetický efekt pri priehľadnej keramike.

Ďalšou výhodou je uvoľňovanie fluoridov, čo má za následok posilnenie okolitých tkanív.

1 Samoneutralizácia pH

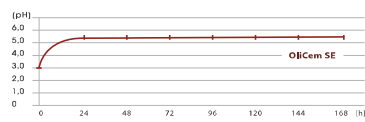

2 Veľkosť častíc OliCem SE a podobných materiálov

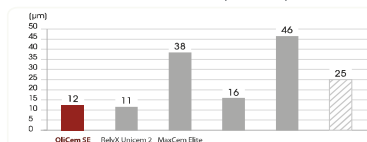

Obj. č.	Balenie	Cena
OL031TR	5ml striekačka 10x mixovacia koncovka 5x intraorálna koncovka dlhá	85,80 €

Podobné produkty:
SpeedCEM - Ivoclar Vivadent
MaxCem Elite - Kerr
G-Cem - GC

OliZircore NANO




S radosťou Vám predstavujeme nový produkt, ktorý sa pripojil k integrovanému systému rekonštrukcie tkaniva po endodontickom ošetrovaní. Využíva nano molekulárnu technológiu a je nenahraditeľný, ako materiál na tvorbu pilierov a cementovanie endodontických čapov. Spolu so sklenenými čapmi OliPost Light vytvára homogénnu a trvanlivú štruktúru.

VÝHODY :

- Perfektná náhrada prirodzeného dentínu
- Dlhotrjavá rekonštrukcia
- NANO-zirkónium dioxide zabezpečujú vysokú RTG-kontrastnosť
- NANO-calciumfluoride zabezpečuje remineralizáciu dentínu
- Rovnaká tvrdosť ako dentín zabezpečuje rovnaké opracovanie

Sila v tlaku OliZircore NANO v porovnaní s podobnými produktmi

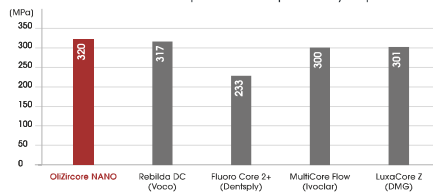

Obj. č.	Balenie	Cena
OL049 - A3	5ml striekačka 5x mixovacie koncovky 10x intraorálne koncovky	57,80 €

Podobné produkty:
MultiCore Flow - Ivoclar Vivadent
LuxaCore Z - DMG

OliPost Light

Sklenené čapy posilnené zirkónom

Inovatívne zirkónom posilnené sklenené čapy

Rekonštrukcia s OliPost Light má excelentné estetické vlastnosti vďaka prirodzenej translúcencii materiálu. Vzhľadom na vysoký modul pružnosti a vysokú pevnosť v ohybe si zub zachováva svoje kľúčové mechanické vlastnosti, čím je zabránené vnútornému napätiu a zlomeniu



- ✓ Testované 70% európskymi dentistami
- ✓ 0% reklamácií za 10 rokov na trhu
- ✓ 100% spokojných lekárov a pacientov



Anatomický tvar	Optimálne rozloženie síl OliPost Light majú špeciálny kónický tvar, ktorý rozkladá sily rovnomerne do prirodzeného zuba a tým eliminuje riziko zlomenia
Ideálne mechanické vlastnosti	Prírodné správanie S modulom elasticity 52Gpa a pevnosťou v strihu 64GPa OliPost Light je veľmi podobný prírodnému dentínu. Tieto vlastnosti sú perfektný balanc medzi silou a elasticitou.
RTG - kontrastné	Vizuálna kontrola Dobrá viditeľnosť na RTG je zabezpečená zložením materiálu. OliPost Light pozostávajú z 68% sklenených vlákien, 19% zirkónu a ostávajúcich 32% tvorí kompozitná živica.
Predsilanizované	Skrátený pracovný čas Čapy sú pokryté náterom na báze silikónu (silan), čím je zabezpečená dobrá prílnavosť k nástrovoým materiálom.

Obj. č.	Balenie	Cena
OL521 - Ø1,0mm OL522 - Ø1,2mm OL523 - Ø1,4mm OL524 - Ø1,6mm	10 kusov	49,00 €

Obj. č.	Balenie	Cena
OL500	5x Ø1,0mm 5x Ø1,2mm 5x Ø1,4mm 5x Ø1,6mm	1x Ø1,0mm OliDrill 1x Ø1,2mm OliDrill 1x Ø1,4mm OliDrill 1x Ø1,6mm OliDrill
		Cena 159,00 €

Podobné produkty:
DT Light Post - VDW
X-Post - Dentsply


OliSemi CEM




Duálne tuhúci materiál na cementáciu korúnok a mostíkov, na implantáty a prírodné pahýle. Predstavuje úplne novú myšlienku semi-trvalého lepenia: nulová chemická adhézia (0MPa) je kompenzovaná riadenou expanziou cementu. To zabezpečuje optimálne lepenie a bezpečné odstránenie všetkých náhrad bez poškodenia.

TOP funkcie a výhody OliSemi CEM:

- ✓ Úplne nová myšlienka dočasnej cementácie - nulová chemická prílnavosť (0 Mpa)!
- ✓ Riadená expanzia materiálu pre dokonalé okrajové tesnenie
- ✓ Flexibilná štruktúra na zníženie tlaku na implantát a kosť
- ✓ Jednoduché a bezpečné odstránenie rekonštrukcie bez rizika poškodenia
- ✓ Biokompatibilné a antibakteriálne zloženie pre pohodlie pacienta

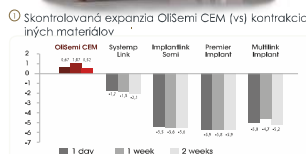

2 Síla prenášaná na zub v porovnaní s inými materiálmi

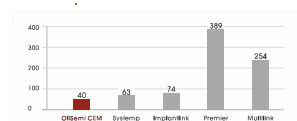

Obj. č.	Balenie	Cena
OL032	5ml striekačka 5x mixovacia koncovka	52,50 €

Podobné produkty:
System Link - Ivoclar Vivadent
Premier Implant - Premier
Implantlink Semi - Detsax

OliTemp esthetic

Materiál na dočasné korunky a mostíky

Novinka medzi materiálmi na dočasné náhrady. Značne zvýšený podiel plniva a katalyzátora (10:1) umožňuje získať vynikajúcu estetiku a mechanickú silu.

Estetika a funkčnosť pre náročných

OliTemp má jedinečnú estetiku a prirodzenú fluorescence. Nízka absorbcia vody poskytuje farebnú stabilitu. Povrch je ľahko vyleštiteľný a hladký po dlhšiu dobu.

Vynikajúce mechanické vlastnosti

OliTemp má perfektné mechanické vlastnosti, ktoré sú odolné voči zlomeniu a pritom si zachovávajú vysokú flexibilitu. Materiál je odolný voči žuvacím silám, pričom zabezpečuje správnu oklúziu a podporu pre susedné zuby.

Jednoduché použitie a modelácia

Automatické zmiešavanie zabezpečuje homogénnu konzistenciu materiálu. Zabrání sa vzniku bublín a tým je riziko trhlin a prasklín minimalizované. Kontrolované chemické vytvrdzovanie umožňuje jednoduchú aplikáciu do a von z úst. Modelácia je jednoduchá, nadmerný materiál sa dá ľahko odstrániť skalpelom alebo nožnicami a následne v konečnej fáze upraviť rotačnými nástrojmi



OliTemp esthetic spĺňa očakávaná aj tých najnáročnejších zubárov a pacientov.

Dočasný mostík zhotovený z mäkkého materiálu predstavuje riziko pre susedné zuby.



OliTemp esthetic aplikácia - miešacia koncovka minimálneje bubliny



Odstánenie prebytku materiálu pomocou skalpela.

Obj. Č.	4:1	1:1
OL089 - A1 OL056 - A2 OL090 - A3		OL066 - A2 OL067 - A3
Balenie	Cena	
50ml 10x miešacia koncovka	84,10 €	

Podobné produkty:
Protemp 4 Garant - 3M Espe

CEMENTY

ENDODONCIA

PROVIZÓRIA

OIiSiil SOFT F

Jemný odťahkový materiál založený na báze aditívnych silikónov. Pre svoju vynikajúcu konzistenciu je vhodný pre double-mix techniku. Odťahky majú vysokú presnosť.



Obj. č.	Balenie	Cena
OL069	2 x 400g 2 x lyžica	69,50 €

Podobné produkty:
Express XT Putty Soft - 3M Espe
Aquisil Ultra Putty - Dentsply
Variotime - Heraeus Kulzer

Technické údaje	OIiSiil Hydro	OIiSiil Suhy	OIiSiil SOFT	OIiSiil Heavy	OIiSiil Putty XS	OIiSiil Mono
Konzistencia	Light	Soft putty	Soft putty	Heavy	Putty	Heavy
Farba (len B komponent)	Fialová	Sivá	Žltá	Žltá	Zelená	Ružovo fialová
Thixotropný/hydrofilný	+ / +	- / +	- / +	+ / +	+ / +	+ / +
Konečná tvrdosť	50	67	65	65	68	70
Miešací čas	—	45 sekúnd	45 sekúnd	—	—	—
Pracovný čas	02:50	02:20	02:20	01:30	01:50	02:00
Vytvrdzovací čas v ústach	03:00	03:00	03:00	02:30	03:00	03:00
ADA 19, Typ 1/ISO 4823, TYP:	Typ 3	Typ 0	Typ 1	Typ 1	Typ 0	Typ 1

OIiSiil SUHY

Základný a-silikón pre prvú vrstvu, double-mix a korekčnú techniku. Vďaka unikátnym hydrofilným vlastnostiam poskytuje excelentnú kvalitu reprodukcie v detailoch aj vo vlhkom prostredí.



Obj. č.	Balenie	Cena
OL068	2 x 300ml 2 x lyžica	69,50 €

Podobné produkty:
Express STD Putty - 3M Espe
Affinis - Coltene
Flexitime - Heraeus Kulzer

OIiSiil Heavy

Hydrofilný a-silikón s vysokou viskozitou. Vysoká reprodukcia detailov a odolnosť voči deformáciám. Automatické miešanie a dávkovanie je zárukou homogénnej zmesi bez bublín.



Obj. č.	Balenie	Cena
OL065	380ml Maximix	82,30 €

Podobné produkty:
Honigum Heavy - DMG
Aquisil Ultra Heavy - Dentsply
Flexitime Light Flow - Heraeus Kulzer

OIiSiil Putty XS

A silikón odťahkový materiál so špeciálne navrhnutou "putty" konzistenciou v automatickom dávkovači. Po aplikácii do odťahkovej lyžice sa ešte môže vytvárať ručne. Jedinečná technológia SNAP-SET zaručuje dlhú pracovnú dobu a rýchle vytvrdnutie v ústach.




Obj. č.	Balenie	Cena
OL079	380ml Maximix 10 x mixovacia koncovka	82,30 €

Podobné produkty:
Honigum Mono - DMG
Aquisil Ultra Mono - Dentsply
Flexitime Monophase - Heraeus Kulzer

OIiSiil Mono

Jednofázová odťahková hmota ideálna pre implantologické rekonštrukcie, teleskopy alebo skeletové náhrady. Zvýšená zatekavosť umožňuje ľahkú aplikáciu na preparovanú oblasť. Konečná tvrdosť zabezpečuje stabilitu odťahku. Vykazujú excelentné hydrofilné vlastnosti.

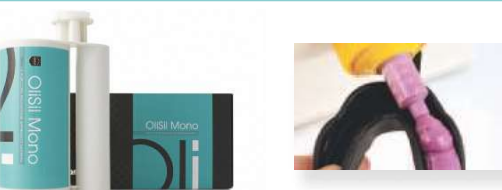

Obj. č.	Balenie	Cena
OL064	380ml Maximix 10 x mixovacia koncovka	82,30 €

Podobné produkty:
Honigum Mono - DMG
Aquisil Ultra Mono - Dentsply
Flexitime Monophase - Heraeus Kulzer

OIiSiil HYDRO

Korekčná extrémne jemná - zatekavá odťahková hmota so super hydrofilnými vlastnosťami, pre použitie pri všetkých odťahkových technikách. Excelentná zatekavosť je kombinovaná s vysokou stabilitou na odťahkovej lyžici a v pacientových ústach.



Obj. č.	Balenie	Cena
OL061	2 x 50ml MediMIX 12 mixovacích koncoviek 10x intraorálna koncovka	42,60 €

Podobné produkty:
Express XT Light - 3M Espe
Aquisil XLV - Dentsply

OIiSiil REGI

OIiSiil REGI je a-silikónový bite-registračný materiál. Nevykazuje žiadnen odpor pri zhryze a vytvrdzuje sa okamžite v pacientových ústach. Je veľmi tvrdý po vytvrdnutí s nulovým deformačným efektom a preto perfektne sedí na modeli.



Obj. č.	Balenie	Cena
OL080	2x 50 ml MediMIX 12 mixovacích koncoviek	42,60 €

Podobné produkty:
Memoreg2 - Heraeus Kulzer
Aquisil Bite - Dentsply
O-Bite - DMG

OIiSiil Adhesive

Tekutý adhezívny lak pre všetky silikónové odťahkové materiály. Tenká vrstva laku poskytuje silnú prílnosť a precízny odťahok.



Obj. č.	Balenie	Cena
OL062	10 ml	11,00 €

Podobné produkty:
Universal Adhesive - Heraeus Kulzer

OIiSiil-C

C-silicone impression material

Kondenzačný typ silikónového odťahkového materiálu na jedno a dvojkrokovú techniku. Dobrá zmiešavacia konzistencia a rýchle nastavenie v ústach zaručuje maximálnu presnosť a trvácnosť. Vysoká pevnosť voči roztrhnutiu je mimoriadne dôležitá v čase odstraňovania z lyžice. OIiSiil-C nezanecháva zvyšky v medzizubných priestoroch. Vysoká rozmerová stabilita a nízka miera zmeny lineárnych rozmerov sú zárukou presnej práce.

VÝHODY:

- Výborná konzistencia počas zmiešavania
- Individuálne nastavenie času
- Ideálna konečná tvrdosť - OIiSiil-C Putty: 70, OIiSiil-C Light: 45
- Vôňa čerstvej máty pre pohodlie pacienta



OIiSiil-C Putty /900ml

OIiSiil-C Light /140ml

OIiSiil-C Activator /60ml

Obj. č.	Balenie	Cena
OL085 - OIiSiil-C Putty	900ml	24,80 €

Obj. č.	Balenie	Cena
OL086 - OIiSiil-C Light	140ml	10,70 €

Obj. č.	Balenie	Cena
OL084 - OIiSiil-C Activator	60ml	11,60 €