

**voco**

# HIGHLIGHTS

**Vysokovýkonný kompozit**

GrandioSO Unlimited –  
4mm univerzálnym kompozitom  
v piatich Cluster farebných  
odtieňoch


**Vitálny a vhodný**

**pre každodenné použitie**

Zachovanie vitality a prekrytie zubnej  
drene s biomateriálom MTA

**Plné chuti**

Profluorid Varnish+BioMin  
s Biosklom je nová sila pre  
posilnenie zubnej skloviny

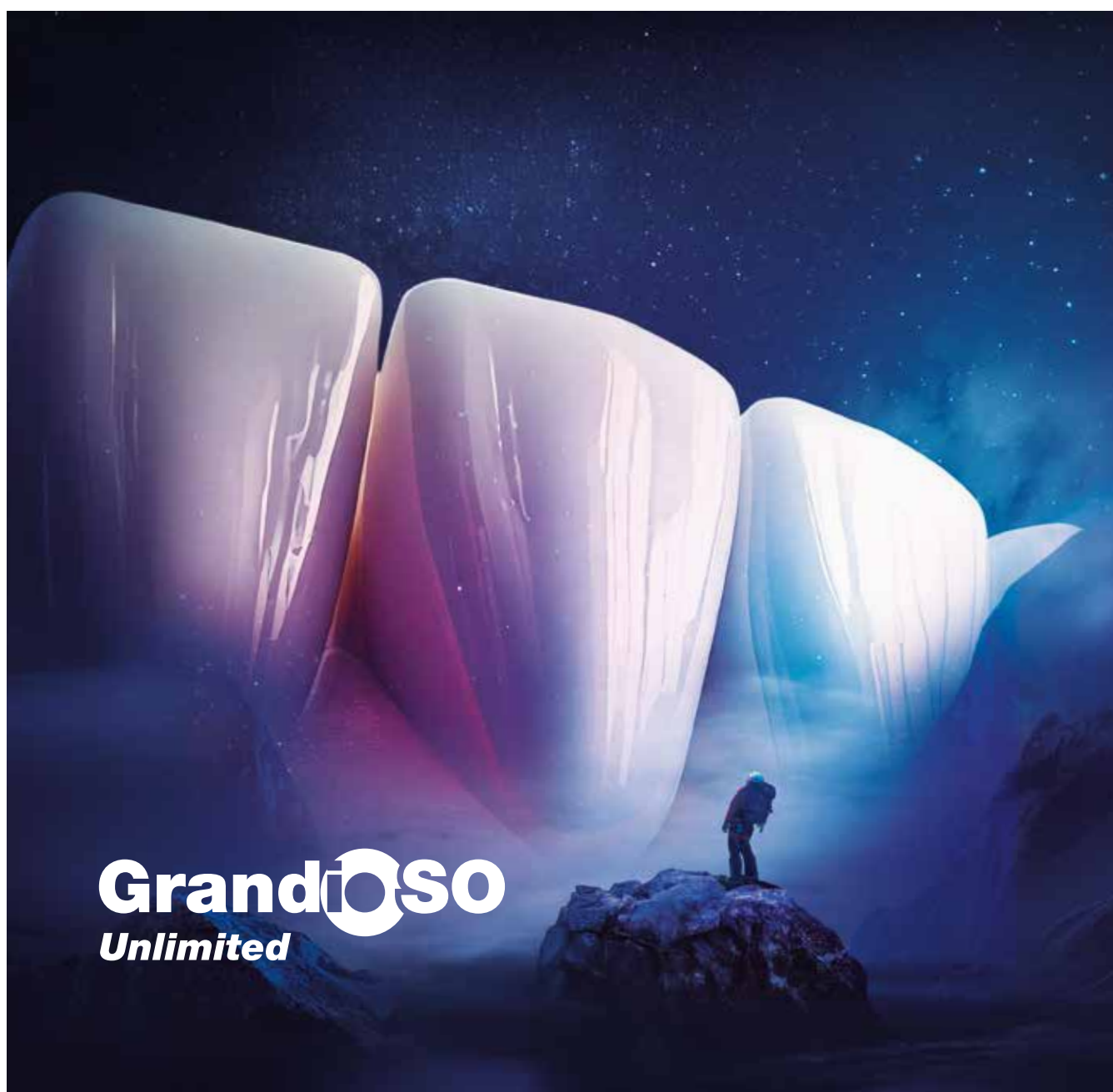

**GrandioSO**  
*Unlimited*

# GrandioSO Unlimited

Univerzálny kompozit do 4mm v piatich odtieňoch Cluster-Shades

Zatiaľ čo estetické univerzálne kompozity musia byť náročne vrstvené v 2 milimetrovej hrúbke a polymerizované, ponúkajú Bulk fill kompozity tú výhodu, že môžu byť vrstvené v hrúbke až do 4mm. Ale vzhľadom na ich nedostatočnú estetiku, sú používané iba v distálnom úseku chrupu. Toto obmedzenie vyriešilo VOCO s materiálom GrandioSO Unlimited. Tento estetický materiál môže byť nanášaný až do hrúbky 4 milimetrov a je vhodný ako do distálneho tak aj do frontálneho úseku chrupu. Takže budete potrebovať iba jeden kondenzovateľný kompozit na všetky typy kavít.

## Cluster shade systém

Navyše iba s piatimi dodávanými farebnými odtieňmi optimálne pripravený na všetky každodenné situácie vo vašej ambulancii a môžete tak znížiť množstvo používaných kompozitov. Vďaka zjednodušenému farebnému systému, možno len s piatimi Cluster odtieňmi pokryť všetkých 16 klasických VITA odtieňov.

GrandioSO Unlimited	A1				A2		A3			A3.5				A4		
VITA® classical	A1	B1	C1	D2	A2	B2	A3	B3	D4	A3.5	C2	C3	D3	B4	A4	C4

## Vysokovýkonný kompozit

S imponantným obsahom plniva až 91% hmotnosti udáva GrandioSO Unlimited nové trendy v oblasti stability a pevnosti. Aj nízka objemová kontrakcia, iba 1,44% znižuje hrozbu vzniku okrajových spár a okrajových zafarbení čím prispieva k výplňam s vysokou kvalitou.



## Testovacie balenie

10 × 0,3 g kapsule  
(po 2 z A1, A2, A3, A3.5, A4)  
+ 10 × Futurabond U SingleDose,  
+ vzorkovník farieb

REF 6257

69,30 € ~~87,50 €\*\*~~

## Sada striekačiek

5 × 4,5 g striekačka  
(A1, A2, A3, A3.5, A4)  
+ vzorkovník farieb

REF 6258

375,20 € ~~469,00 €\*\*~~

## Sada kapsule

75 × 0,3 g kapsule  
(po 15 z A1, A2, A3, A3.5, A4)  
+ vzorkovník farieb

REF 6270

375,20 € ~~469,00 €\*\*~~

Ďalšie obchodné balenia a jednotlivé farby  
nájdete na [www.voco.dental](http://www.voco.dental)

## Vysokovýkonný kompozit

- Univerzálny**  
Pre frontálnu a distálnu oblasť
- Najvyššia stabilita a pevnosť**  
91 váh% obsahu plniva
- 5 Cluster odtieňov**  
Pokrýva všetkých 16 VITA® farieb
- Žiadne vrstvenie**  
Až 4mm v jednej vrstve
- Excelentná estetika**  
Vynikajúca leštitelnosť

# MTA vpt

Zachovanie vitality pulpy pre každodennú prax –  
biokompatibilná a bez monomérov

Na zachovanie vitality zubnej drene je nevyhnutné jej biokompatibilné, stabilné a pre baktérie nepriechodné prekrytie. S MTA vpt ponúka VOCO Mineral Trioxid Agregat (MTA) materiál, ktorý tieto podmienky plne spĺňa. V rámci ošetrovania vitálnej pulpy (VPT,) môže byť MTA vpt použitá na podložky, priame a nepriame prekrytie zubnej drene, ako aj na ošetrovanie zubnej drene po pulpotómii alebo pulpektómii. Aj v rámci ošetrovania zubného kazu, môže byť kariesny dentín spoľahlivo prekrytý MTA vpt.

MTA vpt uvoľňuje pri tuhnutí vápnikové a hydroxidové ióny, ktoré stimulujú telu prirodzené regeneratívne procesy a tvorbu terciárneho dentínu. Pri tomto procese sa vytvára vysoká hodnota pH, ktorá je známa svojím bakteriostatickým účinkom a podporuje remineralizáciu. Týmto spôsobom vytvára MTA vpt stabilnú, pre baktérie nepriepustnú bariéru, ktorá je základom zachovania vitality zubnej drene.



- **Spoľahlivý:** Spoľahlivý: mineralizuje a vytvára stabilné, baktériám odolné utesnenie
- **Časovo efektívne:** umožňuje okamžité ďalšie spracovanie vďaka vrstveniu bez tlaku
- **Praktický:** na použitie pri selektívnom alebo postupnom ošetrovaní kazov a vitálnej terapii zubnej drene



## MTA vpt

Ručné miešanie  
10 g prášok + 10 ml tekutina

REF 1645

173,30 €



## MTA vpt AC

25 ks aplikačných kapsula


REF 1646

188,00 €

## Vyhňte sa endodontickému ošetrovaniu.

## Zachráňte zubnú dreň.

Zachovanie vitality zubnej drene  
v každodennej praxi

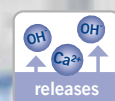



Fluorescencia, ktorá nič neprehliadne:

## Bifix Temp fluorescent

Duálne tuhnutí, dočasný fixačný materiál na báze kompozitu

5 ml QuickMix striekačka  
+ príslušenstvo

REF 1056

60,40 €



Fluorescenčný fixačný materiál

Násadec, nabíjačka batérií,  
napájací kábel, 2 batérie, gumový  
kryt, ochranné návleky, ochranné  
okuliare

REF 9070

389,60 €



## AlignerFlow LC


Fluoreskujúci kompozit pre  
čelustnoortopedické kotevné prvky

2 × 2 g striekačka A1 REF 1526

2 × 2 g striekačka A2 REF 1527

2 × 2 g striekačka A3 REF 1528

87,70 €

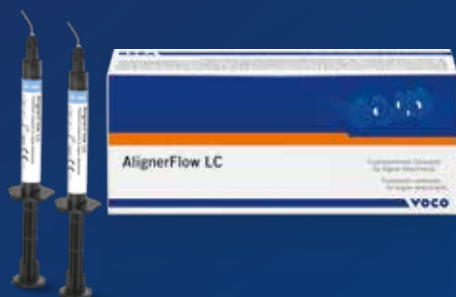

Fluorescenčný kompozit na attachmenty alignerov

CURE & CHECK

## TwinWave

- Vysoký výkon: najmodernejšia výkonom 1 300 mW/cm<sup>2</sup>
- Ľahký a praktický dizajn: Kovový kryt, ochranné návleky, ochranné okuliare
- Jednoduché použitie: Režim (Cure/Check) je možné zvoliť pomocou praktického ovládania
- Neustále pripravený na použitie

detekuje zvyšky, šetrí čas, zaisťuje bezpečnosť



**Múdra  
a výkonná  
lampa 2 v 1**

na svetelnú polymeráciu a  
fluorescenčnú detekciu

**NOVINKA**

ave

LED technológia s vysokým

ové puzdro, celková hmotnosť iba 75 g

(svetelná polymerácia, detekcia fluorescence)

tického otočného prepínača

cie: náhradná batéria je súčasťou balenia

Fluorescenčný materiál na dostavbu jadra zuba  
Fluorescenčný výplňový materiál na provizórne náhrady

## Rebilda DC fluorescent

Prvý systém na dostavbu pahýľov a fixáciu koreňových  
čapov s aktivovateľnou fluorescenciou

50 g kartuša,  
fluoreskujúci dentín,  
+ príslušenstvo

REF 1399  
206,90 €

10 g QuickMix striekačka  
fluoreskujúci dentín,  
+ príslušenstvo

REF 1406  
88,60 €



## Clip F fluorescent

Svetlom tuhnutí výplňový materiál  
pre dočasné výplne

2 x 4 g striekačka

REF 1288  
60,70 €



# Profluorid Varnish + BioMin

Významne vytvrdzuje oslabenú sklovinu –  
v štyroch príjemných príchuťach

Úspešný fluoridový lak VOCO Profluorid Varnish dostáva Bioglas od BioMinu. Tento neviditeľný Bioglas sa rozpúšťa v slinách a uvoľňuje vápnikové a fosfátové ióny, ktoré podporujú remineralizáciu zuba. Spolu s fluoridom z Varnishu sa na povrchu skloviny tvoria kryštalické štruktúry, ktoré okrem iného významne vytvrdzujú, kyslým prostredím oslabenú, sklovinu.

Spolu so známou desenzibilizáciou naozajstná dvojitá ochrana.



Ušetríte do  
**25%\***

**200 × 0,40 ml SingleDose**

Karamel REF 2276  
Čerešňa REF 2277  
Mäta REF 2278  
Žuvačka REF 2279

459,90 € ~~613,20 €\*\*~~

**50 × 0,40 ml SingleDose**

Karamel REF 2270  
Čerešňa REF 2271  
Mäta REF 2272  
Žuvačka REF 2273

153,30 €

**10 ml tuba**

Karamel REF 2266  
Čerešňa REF 2267  
Mäta REF 2268  
Žuvačka REF 2269

43,50 €

**Mix príchuťí**

48 × 0,40 ml SingleDose  
Rozdelené: Karamel, Čerešňa,  
Mäta, Žuvačka

REF 2274

153,30 €

## Profluorid Varnish

Lak s fluoridom na desenzibilizáciu (5% NaF)

Príčinou hypersenzibility zubov sú spravidla otvorené dentínové tubuly. Preto je cieľom ošetrovania, tieto dlhodobo uzavrieť. Profluorid Varnish je lak s obsahom fluoridu, ktorý po preparácii kavít alebo pri citlivých krčkoch efektívne pečatí voľne dostupné dentínové tubuly.

**Výhody v prehľade**

- Rýchla desenzibilizácia a uvoľňovanie fluoridov (22.600 ppm fluoridu)
- Jednoduché nanášanie – toleruje vlhkosť
- Dostupný v siedmich príjemných príchuťach
- Vďaka nanášaniu v tenkých vrstvách je ekonomický

**10 ml tuba**

Mélon REF 1267 Karamel REF 2232  
Mäta REF 2234 Čerešňa REF 2233  
Pina Colada REF 2237 Cola s limetku REF 2236

37,70 €

**200 × 0,40 ml SingleDose**

Mélon REF 1271 Žuvačka REF 2239  
Mäta REF 2231 Čerešňa REF 2230  
Pina Colada REF 2243 Cola s limetku REF 2241  
Karamel REF 2229

399,90 € ~~533,20 €\*\*~~

Ušetríte do  
**25%\***

**5 × 1,70 ml Kartuša**

Mélon REF 2235

36,10 €

**Mix príchuťí**

4 × 10 ml tuba  
Rozdelené: mäta, mélon,  
čerešňa a karamel

REF 2971

113,10 € ~~150,80 €\*\*~~



# Futurabond U

V praktických *SingleDose*

Za Futurabond U stojí dlhý vývojový proces, s jediným cieľom: ponúknuť univerzálne adhezívum, ktoré poskytne užívateľovi len výhody a spoľahlivosť a zároveň urobí tak každý ďalší adhezívny systém v ambulancii zbytočným.

Futurabond U preto posúva hranice väzbových hodnôt a vyniká predovšetkým svojím flexibilným a univerzálnym použitím.

## 50 *SingleDose*

50 × Futurabond U  
+ príslušenstvo

REF 1571

128,60 €

## 200 *SingleDose*

200 × Futurabond U  
+ príslušenstvo

REF 1572

449,20 € ~~514,40 €\*\*~~


Ušetríte do  
**12%\***



# Grandio blocs & Grandio disc

Nanokeramický hybridný CAD/CAM materiál  
pre trvalé rekonštrukcie a fazetové konštrukcie

Grandio blocs/Grandio disc presvedčia so svojimi fyzikálnymi vlastnosťami s ohľadom na elasticitu, pevnosť a vysokým podielom plniva 86% hmotnosti. Týmto sa materiál približuje prirodzenému zubu viac ako všetky ostatné materiály určené na nepriame rekonštrukcie. Grandio bloky/disky sú preferovaným materiálom a predčí bežné rekonštrukčné materiály. Produkty môžu byť v ústach bez problémov opracované a vyleštené do vysokého lesku.

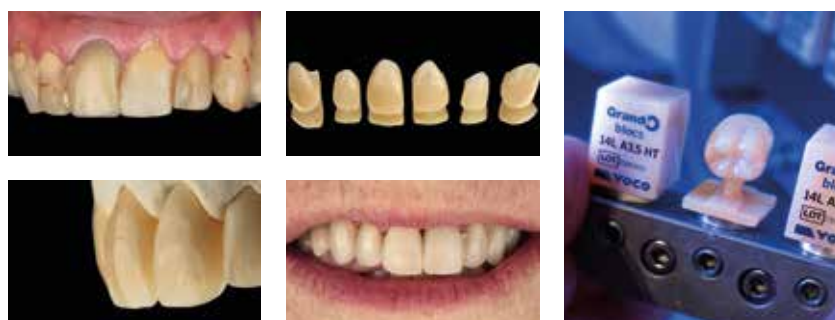

Zdroj: Dr. Felipe Moura, Brazília

	Pre frontálny úsek							Pre distálny úsek			
	A1 LT	A2 LT	A3 LT	A3.5 LT	B1 LT	C2 LT	BL LT	A1 HT	A2 HT	A3 HT	A3.5 HT
Vel. 12	6003	6004	6005	6006	6007	6008	6009	6012	6013	6014	6015
Vel. 14L	6018	6019	6020	6021	6022	6023	6024	6027	6028	6029	6030



K dispozícii v  
hrúbkach 12 mm,  
15 mm a 18 mm

## Grandio disc multicolor

1 × 15 mm (ø 98 mm)

Napríklad:

A2 REF 6217

A3 REF 6218

458,40 €

Ďalšie obchodné balenia a jednotlivé farby  
nájdete na [www.voco.dental](http://www.voco.dental)



K dispozícii  
aj pre  
Planmill®

## Grandio blocs

5 × veľ. 12 LT/HT

REF pozri tabuľku

118,10 €

## Grandio blocs

5 × veľ. 14L LT/HT

REF pozri tabuľku

127,30 €

# Bifix Veneer LC




Jednoducho bezpečný, jednoducho estetický –  
fixácia faziet s optimálnym pracovným postupom

Veľmi estetický a s 81% hmotnosti naplnený svetlom tuhnúci nanohybridný fixačný kompozit Bifix Veneer LC, bol špeciálne vyvinutý na jednoduchú a bezpečnú adhezívnu fixáciu svetlo-priepustných faziet, inlayov a onlayov z kompozitu alebo keramiky.

Prehľadný farebný koncept s tromi odtienmi svetlý, priehľadný a teplý, umožňuje efektívnu fixáciu faziet a pozitívne ovplyvnenie estetického výsledku. Vďaka presne doladeným Try-In pastám sa dá vhodná farba jednoducho vybrať a finálny výsledok tak dopredu overiť.

**Intuitívny a efektívny farebný koncept pre maximálny estetický úspech**

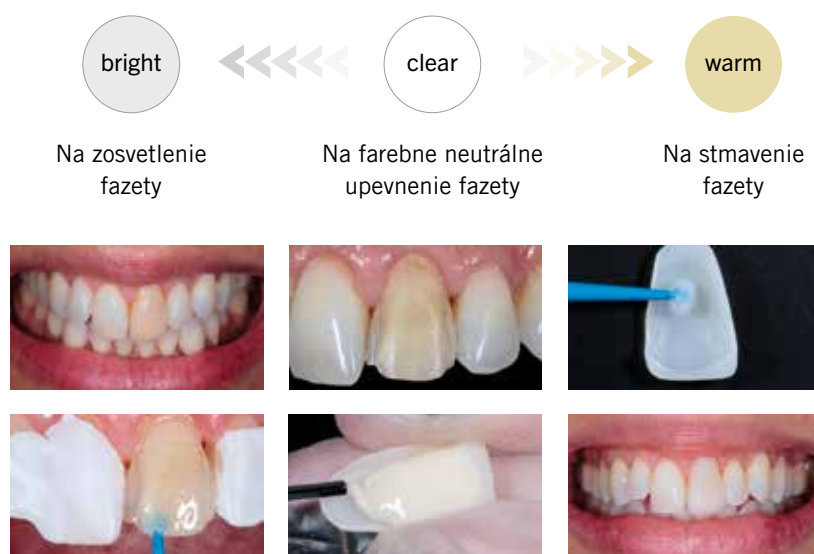

Zdroj: Prof. Carlos Torres, Brazília

Na objednanie uvedených VOCO Highlights oslovte  
Vášho dodávateľa alebo Vášho VOCO poradcu.

\*V porovnaní so zakúpením jedného balenia    \*\*Súčet jednotlivých cien

Ponuky platia len u zúčastnených maloobchodných partnerov. Ceny vášho dentálneho distribútora budú vždy zohľadnené. Všetky uvedené ceny sú odporúčané ceny vrátane DPH. Chyby a opomenutia sú očkávateľné. Nezodpovedáme za chyby tlače.



Ušetríte do  
**20%\***

## Bifix Veneer Sada

3 × 2 g striekačka Bifix Veneer LC  
3 × 2,5 g striekačka Bifix Veneer Try-In  
(bright, clear, warm)  
+ príslušenstvo

REF 1428

177,40 € ~~222,40 €\*\*~~

## Bifix Veneer System Sada

3 × 2 g striekačka Bifix Veneer LC  
3 × 2,5 g striekačka Bifix Veneer Try-In  
(bright, clear, warm)  
2 ml striekačka Vococid  
20 ks SingleDose Futurabond U  
20 ks SingleDose Ceramic Bond  
10 ks Sticky Tim  
+ príslušenstvo

REF 1429

278,30 € ~~351,80 €\*\*~~

Ďalšie obchodné balenia a jednotlivé farby  
nájdete na [www.voco.dental](http://www.voco.dental)

## VOCO GmbH

Anton-Flettner-Straße 1-3  
27472 Cuxhaven  
Nemecko



[voco.dental](http://voco.dental)